

Vimut Application




ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Operating Systems	Version
iOS	12 - 14
Android	9 -11

หมายเหตุ ไม่รองรับ HMS (Huawei Mobile Service)


First Launching

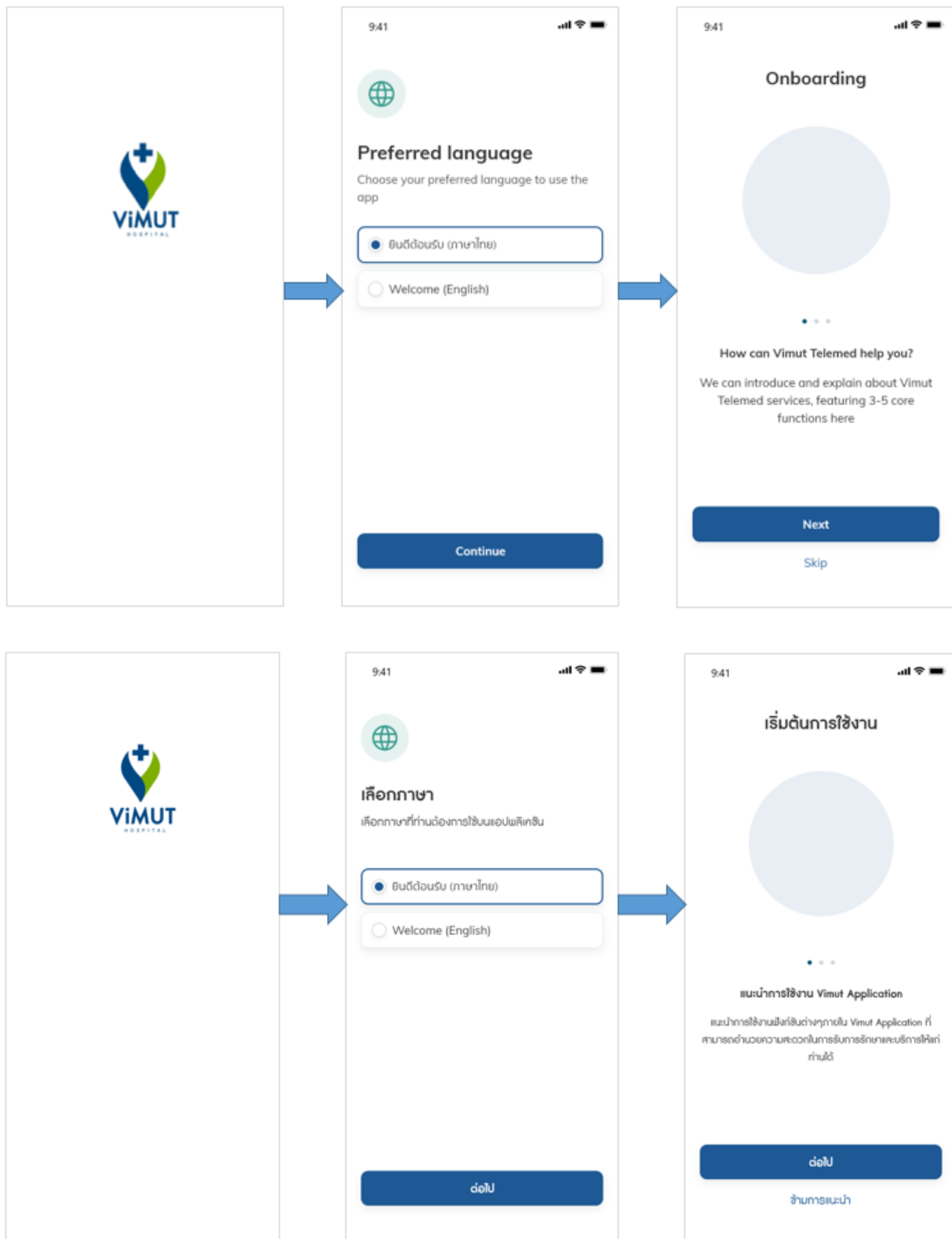


1. กรณีเป็นการเปิดเข้าใช้งาน Vimut Application ครั้งแรก และกรณีลบ Vimut Application และเข้าใช้งานใหม่
 - 1.1. ระบบแสดงหน้าจอ Landing Page: จากนั้นระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ป่วยเลือกภาษาบน Application โดยรายการภาษาที่เป็นตัวเลือกจะแสดงเป็น Radio Button โดยมีตัวเลือก ดังนี้
 - 1.1.1. ยินดีต้อนรับ (ภาษาไทย): ผู้ป่วยเลือกเมื่อต้องการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักใน Application
 - 1.1.2. Welcome (English): ผู้ป่วยเลือกเมื่อต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน Application
 - 1.2. เมื่อผู้ป่วยเลือกภาษาเสร็จสิ้น: กดปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการต่อ ระบบแสดงหน้าจอ Onboarding เพื่อแนะนำ Feature ทั่วไปให้ผู้พบทราบ (รศคอนเฟิร์ม Feature และข้อความที่จะนำมาแสดงในหน้าจอ Onboarding) โดยผู้ป่วยสามารถปิดหน้าจอชั่วคราวเพื่อเลื่อนดู Feature แนะนำได้
 - 1.2.1. ปุ่ม Next: ผู้ป่วยกดปุ่ม Next เมื่อต้องการเลื่อนดู Feature ต่อไป โดยเมื่อกดไปจนถึง Feature สุดท้าย ระบบจะแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)
 - 1.2.2. ปุ่ม Skip: ผู้ป่วยกดปุ่ม Skip เมื่อต้องการดำเนินการต่อ โดยเมื่อกดปุ่ม Skip ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)
2. กรณีทางโรงพยาบาลมีการอัปเดต Vimut Application: ระบบตรวจสอบข้อมูลดังนี้
 - 2.1. กรณีเป็นการอัปเดต Vimut Application โดยไม่มีการอัปเดตข้อมูลในหน้าจอ Onboarding
 - 2.1.1. ระบบแสดงหน้าจอ Landing Page จากนั้นแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)
 - 2.2. กรณีเป็นการอัปเดต Vimut Application โดยมีการอัปเดตข้อมูลในหน้าจอ Onboarding
 - 2.2.1. ระบบแสดงหน้าจอ Landing Page จากนั้นแสดงหน้าจอ Onboarding เพื่อแนะนำ Feature ทั่วไปให้ผู้พบทราบ โดยผู้ป่วยสามารถปิดหน้าจอชั่วคราวเพื่อเลื่อนดู Feature แนะนำได้
 - 2.2.1.1. ปุ่ม Next: ผู้ป่วยกดปุ่ม Next เมื่อต้องการเลื่อนดู Feature ต่อไป โดยเมื่อกดไปจนถึง Feature สุดท้าย ระบบจะแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)
 - 2.2.1.2. ปุ่ม Skip: ผู้ป่วยกดปุ่ม Skip เมื่อต้องการดำเนินการต่อ โดยเมื่อกดปุ่ม Skip ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)

Create Account

1. เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะ Guest Mode ผู้ป่วยสามารถเข้าเมนู Login เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้โดยการกดที่เมนูที่ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน
2. ระบบแสดงหน้าจอ Login เมื่อผู้ป่วยดำเนินการตามข้อ 1.

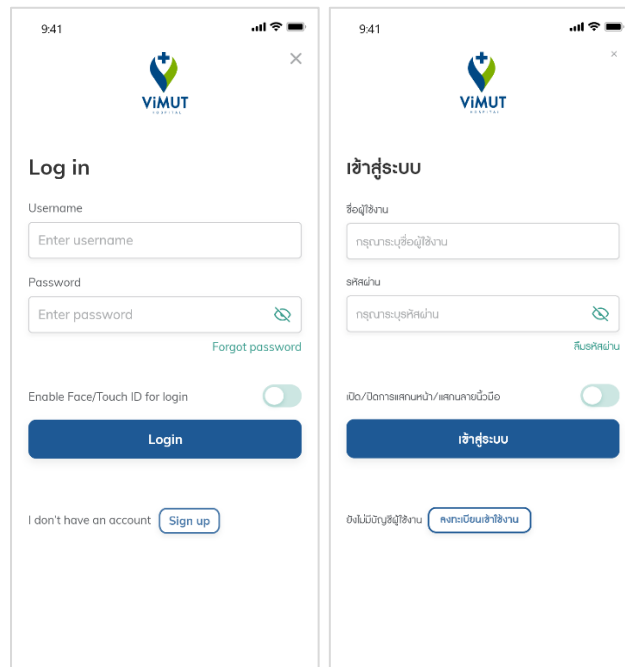

3. ผู้ป่วยกดปุ่ม Sign up: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ผู้ป่วยระบุข้อมูล ดังนี้

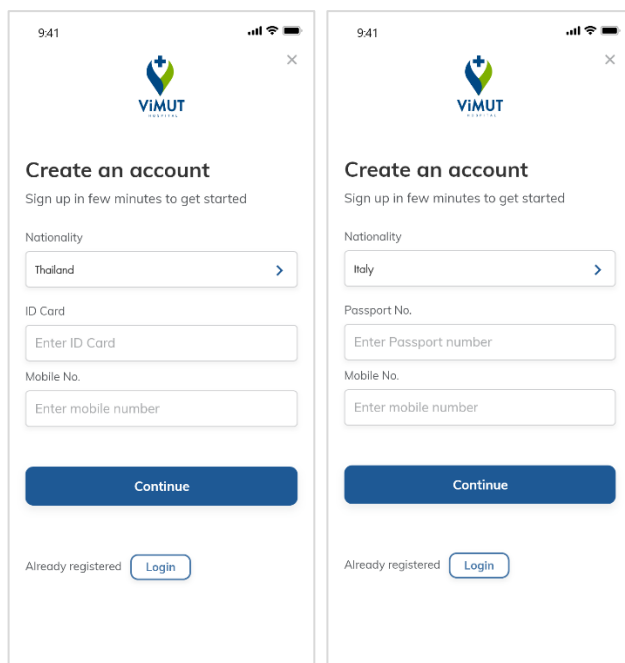

9:41



×

ลงทะเบียนใช้งาน

ลงทะเบียนใช้งาน Vimum Application

สัญชาติ

Thailand

>

เลขบัตรประชาชน

กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

ต่อไป

มีบัญชีใช้งานอยู่แล้ว

เข้าสู่ระบบ

9:41



×

ลงทะเบียนใช้งาน

ลงทะเบียนใช้งาน Vimum Application

สัญชาติ

Italy

>

เลขที่หนังสือเดินทาง

กรุณาระบุเลขที่หนังสือเดินทาง

เบอร์โทรศัพท์

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์

ต่อไป

มีบัญชีใช้งานอยู่แล้ว

เข้าสู่ระบบ

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
สัญชาติ	Nationality	ผู้ปวยเลือกสัญชาติ	1. เป็น Dropdown List 2. Default เป็นสัญชาติไทย 3. เมื่อผู้ปวยกดที่ Field Nationality ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวย ค้นหาสัญชาติ (อ้างอิง Flow 3.1: Create Account)
เลขบัตรประชาชน	ID Card	ผู้ปวยระบุข้อมูลเลขบัตรประชาชน	1. ระบบแสดง Field นี้เมื่อผู้ปวย เลือกสัญชาติเป็นสัญชาติไทย 2. เป็น Text Field และเป็น Require Field 3. จำกัดความยาว 13 ตัวอักษร
เลขที่หนังสือเดินทาง	Passport No.	ผู้ปวยระบุข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง	1. ระบบแสดง Field นี้เมื่อผู้ปวย เลือกสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นๆ นอกจากสัญชาติไทย 2. เป็น Text Field และเป็น Require Field
เบอร์โทรศัพท์	Mobile No.	ผู้ปวยระบุข้อมูลเบอร์โทรศัพท์	1. เป็น Text Field และเป็น Require Field

		3. เมื่อผู้ปวยกดที่ Field และระบบ ข้อมูล ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลปุ่ม Cancel เป็นปุ่ม ✕ เพื่อให้ผู้ปวยกดเพื่อ Clear การค้นหา 4. เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Cancel ระบบแสดงหน้าจอระบบข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน (อ้างอิง Flow 3.: Sign up)
สัญชาติ AFGHAN (อัฟกานิสถาน) -เอเชียใต้ AFRICAN (แอฟริกา) -แอฟริกา ALBANIAN (แอลเบเนีย) -ยุโรป ALGERIAN (แอลจีเรีย) -แอฟริกา	แสดงรายการข้อมูลสัญชาติ	1. เมื่อผู้ปวยกดเลือกรายการข้อมูล ระบบทำการปิดหน้าจอค้นหาแล้ว Prefill ข้อมูลที่ผู้ปวยเลือกที่ช่อง Nationality 2. ระบบแสดงข้อมูลตามตาราง Master Natioinality (อ้างอิง Flow 3.2: Create Account)

3.2. ตารางข้อมูล Master Natioinality

3.2.1. กรณีผู้ปวยเลือกภาษาบน Vimut Application เป็นภาษาอังกฤษ: ระบบแสดงลำดับข้อมูล ดังนี้

NO	Nationality (EN)
1	AFGHAN
2	AFRICAN
3	ALBANIAN
4	ALGERIAN
5	AMERICAN
6	ANDORRAN
7	ANGOLAN
8	ANTIGUA AND BARBUDA
9	ANTIGUAN AND BARBUDAN
10	ARAB EMIRATES
11	ARGENTINIAN
12	ARMENIAN
13	AUSTRALIAN

14	AUSTRIAN
15	AZERBAIJAN
16	BAHAMIAN
17	BAHRAINI
18	BANGLADESHI
19	BARBADIAN
20	BELARUSIAN
21	BELGIUM
22	BELIZEAN
23	BENINESE
24	BENINESE
25	BERMUDIAN
26	BHUTANI
27	BOLIVIAN
28	BOSNIA
29	BOSNIA AND HERZEGOVINA
30	BOTSWANA
31	BRAZILIAN
32	BRITISH
33	BRUNEIAN
34	BULGARIA
35	BURKINA FASO
36	BURUNDIAN
37	CAMBODIAN
38	CAMEROONIAN
39	CANADIAN
40	CAPE VERDEAN
41	CAYMANIAN
42	CHADIAN
43	CHILEAN
44	CHINA-THAI
45	CHINESE

46	COLOMBIAN
47	COMORIENNE
48	CONGOLESE
49	Co-operative Republic of Guyana
50	COSTA RICAN
51	CROATIAN
52	CUBAN
53	CYPRIOT
54	CZECH
55	DANISH
56	DJIBOUTI
57	DOMINICAN
58	DUBAI
59	DUTCH
60	ECUADORIAN
61	EGYPTIAN
62	EQUATORIAL GUINEA
63	ERITREA
64	ESPANOLA
65	ESTONIAN
66	ETHIOPIAN
67	FIJIAN
68	FILIPINO
69	FINNISH
70	FRENCH
71	GABONESE
72	GAMBIAN
73	GEORGIAN
74	GERMAN
75	GHANAIAAN
76	GREENLANDER
77	GUATEMALAN

78	GUINEA
79	GUINEAN
80	GUYANESE
81	HAITIAN
82	Hellenic (greek)
83	HONDURAN
84	HONG KONG
85	HUNGARIAN
86	IBERIAN
87	ICELANDIC
88	INDIAN
89	INDIA-THAI
90	INDONESIAN
91	IRANIAN
92	IRAQI
93	IRISH
94	ISRAELI
95	ITALIAN
96	IVORY COAST [IVORIAN]
97	JAMAICAN
98	JAPANESE
99	JAPAN-THAI
100	JORDANIAN
101	KASHMIRI
102	KAZAK
103	KENYAN
104	KITTITIAN (s), NEVISIAN (s)
105	KOREAN NORTH
106	KOREAN SOUTH
107	KOREA-THAI
108	KOSOVO
109	KUWAITI

110	KYRGYZ
111	Lahu
112	LAOTIAN
113	LATVIAN
114	LEBANESE
115	LIBERIAN
116	LIBYAN
117	LIECHTENSTEIN
118	LITHUANIAN
119	LUXEMBOURGER
120	MACEDONIAN
121	MALAGASY
122	MALAWIAN
123	MALAYSIAN
124	MALBILIAN
125	MALDIVIAN
126	MALIAN
127	MALTESE
128	MASHALLESE
129	MAURETANIAN
130	MAURITIAN
131	MEXICAN
132	MICRONESIAN
133	MOLDOVAN
134	MONEGASQUE
135	MONGOLIAN
136	MONTENEGRINS
137	MOROCCAN
138	MOSOTHO
139	MOZAMBICAN
140	MYANMAR
141	NAMIBIAN

142	NAURUAN
143	NEPALESE
144	NEW ZEALANDER
145	NICARAGUAN
146	NIGER
147	NIGERIAN
148	NORWEGIAN
149	OMANI
150	PAKISTANI
151	PALESTINIAN
152	PANAMANIAN
153	PAPUAN
154	PARAQUAYAN
155	PERUVIAN
156	POLISH
157	PORTUGUESE
158	PUERTORICAN
159	PUERTORICO
160	QATARI
161	Republic of Sierra Leone
162	Republica Moldova
163	ROMANIAN
164	RUSSIAN
165	RWANDA
166	SAINT KITTS AND NEVIS
167	SALVADORAN
168	Sammarinese
169	SAMOAN
170	SAN MARINO
171	SAUDI
172	SCOTTISH
173	SENEGALESE

174	SERB
175	SERBIAN
176	Seychellois
177	SIERRA LEONEAN
178	SINGAPOREAN
179	SLOVAK
180	SLOVENE
181	SOLOMON ISLANDER
182	SOMALI
183	SOUTH AFRICAN
184	SOUTH SUDAN
185	SPANISH
186	SRILANKAN
187	SRPSKO
188	St. Kitts and Nevis
189	SUDANESE
190	SWAZILAND
191	SWEDISH
192	SWISS
193	SYRIA
194	SYRIAN
195	Taihue
196	TAIWANESE
197	TAJIK
198	TANZANIAN
199	THAI
200	TIBETAN
201	TIMORESE
202	TOGOLESE
203	TONGA
204	TRINIDADIAN
205	TUNISIAN

206	TURKISH
207	TURKMENISTAN
208	TUVALUAN
209	UGANDAN
210	UKRAINIAN
211	URUGUAYAN
212	UZBEK
213	VANUATU
214	VATICANIAN
215	VENEZUELAN
216	VIETNAMESE
217	VINCENTIAN
218	WELSH
219	YEMENI
220	YUGOSLAVIA
221	ZAIRESE
222	ZAMBIAN
223	ZCEHCOSLOVAKIA
224	ZIMBABWEAN

3.2.2. กรณีผู้ปวยเลือกภาษาบน Vimut Application เป็นภาษาไทย: ระบบแสดงลำดับข้อมูล ดังนี้

NO	Nationality (TH)
1	ANTIGUA AND BARBUDA
2	ANTIGUAN AND BARBUDAN
3	CAPE VERDEAN
4	Hellenic (greek)
5	IVORY COAST [IVORIAN]
6	MALBILIAN
7	MONTENEGRINS
8	St. Kitts and Nevis
9	ZAIRESE

10	ZCEHCOSLOVAKIA
11	กรีนแลนด์
12	กัมพูชา
13	กัวเตมาลา
14	กาตาร์
15	กานา
16	กาบองนิส
17	กายอานา
18	กิวินี
19	กีเนียน
20	เกาหลีใต้
21	เกาหลีเหนือ
22	แกมเบีย
23	คองโก
24	คอสตาริกา
25	คาซัคสถาน
26	คิวบา
27	คีร์กีซสถาน
28	คูเวต
29	เคนยา
30	แคชเมียร์
31	แคนาดา
32	แคเมอรูน
33	โคโซโว
34	โคโมเรียน
35	โครเอเชีย
36	โคลัมเบีย
37	จอร์เจีย
38	จอร์แดน
39	จาเมกา
40	จิบูตี
41	จีน

42	ชาด
43	ชิลี
44	เซเชลวาร์
45	เชื้อชาติเกาหลี สัญชาติไทย
46	เชื้อชาติจีน สัญชาติไทย
47	เชื้อชาติญี่ปุ่น สัญชาติไทย
48	เชื้อชาติอินเดีย สัญชาติไทย
49	ชานมารีโน
50	ชานมารีโน
51	ชามัวตะวันตก
52	ชาอูดีอาระเบีย
53	ชิมบับเว
54	ซีเรีย
55	ซีเรีย
56	ชูดาน
57	เซนต์คิตส์และเนวิส
58	เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
59	เซเนกัล
60	เซอร์เบีย
61	เซอร์เบีย
62	เซาท์ซูดาน
63	เซียรา เลโอน
64	แซมเบีย
65	โซมาเลีย
66	ไซปรัส
67	ญี่ปุ่น
68	ดูไบ
69	โดมินีกา
70	ตองกา
71	ตองโกลิส
72	ติมอร์
73	ตุรกี

74	ตูนิเซีย
75	ตูวาลู
76	เติร์กเมนิสถาน
77	ไต้หวัน
78	ทรินิเดียน
79	ทาจิสถาน
80	ทิเบต
81	แทนซาเนีย
82	ไทย
83	ไทลื้อ - ชาวไทยภูเขา
84	นย
85	นอร์เวย์
86	นามิเบีย
87	นิการากัว
88	นิวซีแลนด์
89	เนเธอร์แลนด์
90	เนปาล
91	ไนจีเรีย
92	ไนเจอร์
93	บราซิล
94	บรูไน
95	บอตสวานา
96	บอสเนีย
97	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
98	บังคลาเทศ
99	บัลแกเรีย
100	บาเบโดส
101	บาร์เรน
102	บาฮามัส
103	บูรุนดี
104	บูร์กินาฟาโซ
105	เบนิน

106	เบลเยียม
107	เบลารุส
108	เบลีซ
109	เบอร์มิวดา
110	โบลิเวีย
111	ปากีสถาน
112	ปานามา
113	ปาปัว นิวกินี
114	ปาปัวนิวกินี
115	ปารากวัย
116	ปาเลสไตน์
117	เปรู
118	เปอโตริโก
119	เปอร์โตริโก
120	โปรตุเกส
121	โปแลนด์
122	ฝรั่งเศส
123	พม่า
124	ฟิลิ
125	ฟินแลนด์
126	ฟิลิปปินส์
127	ภูฏาน
128	มองโกเลีย
129	มอริเชียส
130	มอริเตเนีย
131	มอลตา
132	มัลดีฟส์
133	มาซิโดเนีย
134	มาดากัสการ์
135	มาลาวี
136	มาลี
137	มาเลเชีย

138	เม็กซิโก
139	โมซัมบิก
140	โมโดวา
141	โมนาโก
142	โมร็อกโก
143	ไมโครนีเชีย
144	มุกันดา
145	มูโกสลาเวีย
146	มูโกสลาเวีย
147	ยูเครน
148	เยเมน
149	เยอรมัน
150	รวันดา
151	โรมาเนีย
152	ลักเซมเบิร์ก
153	ลัตเวีย
154	ลาว
155	ลาหู่-ชาวไทยภูเขา
156	ลิกเทินสไตน์
157	ลิทัวเนีย
158	ลิเบีย
159	เลโซโท
160	เลบานอน
161	ไลบีเรีย
162	วาติกันซิตี
163	วานูอาตู
164	เวเนซุเอลา
165	เวลส์
166	เวียดนาม
167	ศรีลังกา
168	สกอตแลนด์
169	สเปน

170	สโลวะเกีย
171	สโลวีเนีย
172	สวาซิแลนด์
173	สวิตเซอร์แลนด์
174	สวีเดน
175	สหพันธรัฐเชนคิตส์ลัะเนวิส
176	สหพันธรัฐรัสเซีย
177	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
178	สาธารณรัฐเช็ก
179	สาธารณรัฐเชียวราลีโอน
180	สาธารณรัฐนาอูรู
181	สาธารณรัฐเบนิิน
182	สาธารณรัฐมอลโดวา
183	สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
184	สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
185	สาธารณรัฐไอร์แลนด์
186	สิงคโปร์
187	หมู่เกาะเคย์แมน
188	หมู่เกาะโซโลมอน
189	อเมริกา
190	ออสเตรเลีย
191	ออสเตรีย
192	อังกฤษ
193	อันดอร์รา
194	อัฟกานิสถาน
195	อาเซอร์ไบจาน
196	อาร์เจนตินา
197	อาร์เมเนีย
198	อิตาลี
199	อินเดีย
200	อินโดนีเซีย
201	อิรัก

202	อิสราเอล
203	อิหร่าน
204	อียิปต์
205	อุซเบกิสถาน
206	อุรูกวัย
207	เอกวาดอร์
208	เอธิโอเปีย
209	เอริเทรีย
210	เอลซัลวาดอร์
211	เอสโตเนีย
212	เอสปาโนลา
213	แองโกลา
214	แอฟริกา
215	แอฟริกาใต้
216	แอลจีเรีย
217	แอลเบเนีย
218	โอมาน
219	ไอซ์แลนด์
220	ไอบีเรีย
221	ฮ่องกง
222	ฮอนดูรัส
223	ฮังการี
224	เฮติ

4. เมื่อผู้ปวยระบุข้อมูลเสร็จสิ้น กดปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการต่อ โดยระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

- 4.1. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุเลขบัตรประชาชน: ระบบแสดงระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน” ได้ Field เลขบัตรประชาชน
- 4.2. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง: ระบบแสดงระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขที่หนังสือเดินทาง และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเลขที่หนังสือเดินทาง” ได้ Field เลขที่หนังสือเดินทาง
- 4.3. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุเบอร์โทรศัพท์: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เบอร์โทรศัพท์ และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์” ได้ Field เบอร์โทรศัพท์
- 4.4. กรณีผู้ป่วยระบุเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก: ระบบแสดงระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ได้ Field เลขบัตรประชาชน
- 4.5. กรณีผู้ป่วยระบุรูปแบบของเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน และแสดงข้อความแจ้งเตือน “เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณาระบุใหม่อีกครั้ง” ได้ Field เลขบัตรประชาชน
- 4.6. กรณีผู้ป่วยระบุเบอร์โทรศัพท์ไม่ครบ 10 ตัวอักษร: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เบอร์โทรศัพท์ และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ 10 ตัวอักษร” ได้ Field เบอร์โทรศัพท์
- 4.7. กรณีผู้ป่วยระบุข้อมูลถูกต้อง: ระบบเรียก API “SearchRegistration” เพื่อค้นหาข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในฐานข้อมูลโรงพยาบาล
 - 4.7.1. กรณีพบข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในฐานข้อมูลโรงพยาบาล: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ท่านมีบัญชีผู้ใช้สำหรับ Vimut Application และเว็บไซต์ ร.พ. วิมุต อยู่แล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยชื่อ

ผู้ใช้ [Username]" (ระบบแสดงข้อมูล Username แบบ Masking โดยเปิดแสดงข้อมูลเฉพาะอักขรตัวแรก และตัวสุดท้ายเท่านั้น โดยข้อมูลที่ถูกระเบิด Masking จะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ – ตัวอย่าง กรณีที่ Username เป็น vimut ระบบจะทำการ Masking ข้อมูล ดังนี้ v---t) เมื่อผู้ปวยกดปิดข้อความแจ้งเตือน ระบบแสดงหน้าจอ Login เพื่อให้ผู้ปวย Login ด้วย Username/Password, ระบรหัส OTP, และตั้งรหัส PIN (อ้างอิงตาม Flow ในหัวข้อ Login: 4.6.1)

4.7.2. กรณีไม่พบข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในฐานข้อมูลโรงพยาบาล: ระบบตรวจสอบข้อมูล และแสดงหน้าจอ ดังนี้

The screenshots illustrate the OTP verification process in Thai:

- Top Left:** Initial screen with a timer (02:58), a verification icon, and the text "Verify your number with the code sent to 0XX-XXX-7168". The input field is empty.
- Top Right:** After entering the code 239104, a red message "Sorry, the OTP is incorrect" appears. The "Continue" button is blue.
- Bottom Left:** The code 239104 is entered. The "Continue" button is grey.
- Bottom Right:** The code 239104 is entered. A red message "รหัส OTP ไม่ถูกต้อง" (OTP code is incorrect) appears. The "Continue" button is blue.

- 4.7.2.1. กรณีผู้ป่วยมีประวัติข้อมูลผู้ป่วยกับทางโรงพยาบาลอยู่แล้ว: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ระบบทำการส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาล” และส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในฐานข้อมูลโรงพยาบาล เป็นข้อความ “กรุณกรอก xxxxxx ใน [ViMUT App.] ภายใน x นาที” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาไทย หรือ ส่งข้อความ “Please enter xxxxxx into [ViMUT App.] within the next x mins” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อผู้ป่วยกดปิดข้อความแจ้งเตือนระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยระบุรหัส **OTP 6 หลัก** เพื่อยืนยันตัวตน โดยรหัส OTP จะมีอายุ **5 นาที**
- 4.7.2.2. กรณีผู้ป่วยไม่มีประวัติข้อมูลผู้ป่วยกับทางโรงพยาบาล: ระบบส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ป่วยระบุ เป็นข้อความ “กรุณกรอก xxxxxx ใน [ViMUT App.] ภายใน x นาที” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาไทย หรือ ส่งข้อความ “Please enter xxxxxx into [ViMUT App.] within the next x mins” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาอังกฤษ และระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยระบุรหัส **OTP 6 หลัก** เพื่อยืนยันตัวตน โดยรหัส OTP จะมีอายุ **5 นาที**
- 4.7.2.3. ปุ่ม X: ผู้ป่วยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิดหน้าจอ โดยเมื่อกดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode) และรหัส OTP จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
- 4.7.2.4. ปุ่ม Resend code: ผู้ป่วยกดปุ่ม “Resend code” กรณีต้องการให้ระบบส่ง OTP ใหม่ โดยระบบจะ Enable ปุ่ม Resend code เมื่อ OTP หมดอายุแล้วเท่านั้น เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม Resend code ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ใหม่ให้คุณเรียบร้อยแล้ว” เมื่อผู้ป่วยกดปิดข้อความแจ้งเตือน ระบบส่งรหัส OTP ใหม่ให้กับผู้ป่วย และเริ่มนับถอยหลังเวลาหมดอายุของ OTP อีกครั้ง
- 4.7.2.5. ปุ่ม Continue: ระบบจะ Enable ปุ่มเมื่อผู้ป่วยระบุรหัส OTP ครบถ้วนแล้วเท่านั้น หลังจากนี้ผู้ป่วยระบุหมายเลข OTP ผู้ป่วยกดปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
- กรณีผู้ป่วยระบุ OTP ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field ระบุรหัส OTP และแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัส OTP ไม่ถูกต้อง” ได้ Field ระบุรหัส OTP
 - กรณีผู้ป่วยระบุ OTP ที่หมดอายุ: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field ระบุรหัส OTP และแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัส OTP หมดอายุ” ได้ Field ระบุรหัส OTP
 - กรณีผู้ป่วยระบุรหัส OTP ถูกต้อง: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยระบุข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

941

Step 2/3

Create an account

Please fill the form below in Thai

Title name

Select title name

First name

Middle name

Last name

Please fill the form below in English (Optional)

First name

Middle name

Last name

Date of birth

09 / 04 / 1993

Email

ninja@inky.com

☐ I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Continue

941

Step 2/3

Create an account

Please fill the form below in Thai

Title name

นาย

First name

นาย

Middle name

Middle name

Last name

ใจดี

Please fill the form below in English (Optional)

First name

First name

Middle name

Middle name

Last name

Suntonnitikul

Date of birth

09 / 04 / 1993

Email

ninja@inky.com

☒ I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Continue

941

Step 3/3

Create an account

Terms & Conditions

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

1. Stet clita kasd gubergren

No sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Close

941

ขั้นตอนที่ 2/3

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวด้านภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อกลาง

นามสกุล

นามสกุล

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวด้านภาษาที่ใช้ (ไม่จำเป็น)

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อกลาง

นามสกุล

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

กรุณาเลือกวัน/เดือน/ปีเกิด

อีเมล

อีเมล

☐ ขอรับส่งการแจ้งเตือนข่าวสารการใช้งาน Vimut Application

ต่อไป

941

ขั้นตอนที่ 2/3

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวด้านภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้

นาย

ชื่อ

นาย

ชื่อกลาง

ชื่อกลาง

นามสกุล

ใจดี

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวด้านภาษาที่ใช้ (ไม่จำเป็น)

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อกลาง

ชื่อกลาง

นามสกุล

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

09 / 04 / 1993

อีเมล

ninja@inky.com

☒ ขอรับส่งการแจ้งเตือนข่าวสารการใช้งาน Vimut Application

ต่อไป

941

Step 3/3

Create an account

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

1. Stet clita kasd gubergren

No sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

ไป

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
กรณารระบุข้อมูลใน ฟอร์มด้านล่างเป็น ภาษาไทย	Please fill the form below in Thai		- กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติไทย: ระบบแสดง Field ให้ผู้ปวยระบุ ข้อมูลภาษาไทยก่อน - กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติอื่นๆที่ ไม่ใช่สัญชาติไทย:ระบบแสดง ประโยค (Optional) หรือ (ไม่ จำเป็นต้องระบุ) ต่อท้ายประโยค
ค่านำหน้าชื่อ	Title name	ผู้ปวยเลือกข้อมูลค่านำหน้าชื่อ	เป็น Dropdown List และเป็น Require Field - Default เป็น “Select title name” กรณีเป็นภาษาอังกฤษ และ Default เป็น “กรุณาเลือก” กรณี เป็นภาษาไทย - กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็น สัญชาติไทย: ระบบแสดงข้อมูล ใน Dropdown List เป็นคำ นำหน้าชื่อภาษาไทย ดังนี้ - นาย - นางสาว - นาง - เด็กชาย - เด็กหญิง - กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็น สัญชาติอื่นๆ: ระบบแสดงข้อมูล ใน Dropdown List เป็นคำ นำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ ดังนี้ - Mr. - Ms. - Mrs. - Master - Miss

ชื่อ	First name	ผู้ปวยระบุข้อมูลชื่อ (ภาษาไทย)	1. เป็น Text Field 2. เป็น Require Field กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็น สัญชาติไทย และเป็น Optional Field กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นๆ 3. จำกัดความยาว 100 ตัวอักษร
ชื่อกลาง	Middle name	ผู้ปวยระบุข้อมูลชื่อกลาง (ภาษาไทย)	1. เป็น Text Field และเป็น Optional Field 2. จำกัดความยาว 50 ตัวอักษร
นามสกุล	Last name	ผู้ปวยระบุข้อมูลนามสกุล (ภาษาไทย)	1. เป็น Text Field 2. เป็น Require Field กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และเป็น Optional Field กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นๆ 3. จำกัดความยาว 100 ตัวอักษร
กรุณาระบุข้อมูลใน ฟอร์มด้านล่างเป็น ภาษาอังกฤษ	Please fill the form below in English		1. กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติอื่นๆ นอกจากสัญชาติไทย: ระบบ แสดง Field ให้ผู้ปวยระบุข้อมูล อังกฤษก่อน 2. กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติไทย: ระบบแสดงประโยค (Optional) หรือ (ไม่จำเป็นต้องระบุ) ต่อท้ายประโยค
ชื่อ	First name	ผู้ปวยระบุข้อมูลชื่อ (ภาษาอังกฤษ)	1. เป็น Text Field 2. เป็น Require Field กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นๆ และเป็น Optional Field กรณีผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติไทย 3. จำกัดความยาว 100 ตัวอักษร

ชื่อกกลาง	Middle name	ผู้ปวยระบุข้อมูลชื่อกกลาง (ภาษาอังกฤษ)	1. เป็น Text Field และเป็น Optional Field 2. จำกัดความยาว 50 ตัวอักษร
นามสกุล	Last name	ผู้ปวยระบุข้อมูลนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	1. เป็น Text Field 2. เป็น Require Field กรณีผู้ปวย เลือกสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นๆ และเป็น Optional Field กรณี ผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติ ไทย 3. จำกัดความยาว 100 ตัวอักษร
วัน/เดือน/ปีเกิด	Date of birth	ผู้ปวยระบุข้อมูลวัน/เดือน/ปี เกิด	1. เป็น Date Picker และเป็น Require Field 2. Default เป็น "Please select date of birth" กรณีเป็น ภาษาอังกฤษ และ Default เป็น "กรุณาเลือกวัน/เดือน/ปีเกิด" กรณีเป็นภาษาไทย 3. Format: dd/mm/yyyy (ค.ศ.)
อีเมล	Email	ผู้ปวยระบุข้อมูลอีเมล	1. เป็น Text Field และเป็น Optional Field 2. จำกัดความยาว 255 ตัวอักษร 3. Format: vimut@example.com
Checkbox: ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้ งาน Vimut Application	Checkbox: I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy	ผู้ปวย Check เพื่อยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ งาน Vimut Application ☐ หมายถึง ไม่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ งาน Application ☒ หมายถึง ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ งาน Application	1. เป็น Checkbox 2. กรณีผู้ปวย Uncheck: ระบบ Disable ปุ่ม Continue 3. กรณีผู้ปวย Check: ระบบ Enable ปุ่ม Continue 4. เมื่อผู้ปวยกดที่ข้อความ Terms and Conditions and Privacy Policy: ระบบแสดงหน้าจอ ข้อความข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งาน Application โดยเมื่อ ผู้ปวยกดปุ่ม Close ระบบปิด

			หน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application หมายเหตุ รอคอนเฟิร์มข้อความ Checkbox และข้อความเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Vimut Application
ปุ่ม ต่อไป	ปุ่ม Continue	ผู้ปวยกดปุ่มเมื่อต้องการดำเนินการต่อ	1. ปุ่มจะ Disable เมื่อผู้ปวย Uncheck Checkbox ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application และระบุข้อมูลใน Require Field ครบถ้วน 2. ปุ่มจะ Enable เมื่อผู้ปวย Check Checkbox ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application และระบุข้อมูลใน Require Field ครบถ้วน
ปุ่ม X		ผู้ปวยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิดหน้าจอ	เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม X ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)

- เมื่อผู้ปวยระบุข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่ม Continue ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ปวยระบุ ดังนี้

941

Step 2/3

Create an account

Please fill the form below in Thai

Title name

นาย

First name

สมชาย

Middle name

Middle name

Last name

ใจดี

Please fill the form below in English (Optional)

First name

First name

Middle name

Middle name

Last name

Suntornnitikul

Date of birth

09 / 04 / 1993

Email

ninja@inky

Format is vimut@example.com

☒ I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy

Continue

941

ขั้นตอนที่ 2/3

ลงทะเบียนใช้งาน

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวด้านล่างเป็นภาษาไทย

ตำแหน่งชื่อ

นาย

ชื่อ

สมชาย

ชื่อกลาง

ชื่อกลาง

นามสกุล

ใจดี

กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องระบุ)

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อกลาง

ชื่อกลาง

นามสกุล

นามสกุล

วันเดือนปีเกิด

09 / 04 / 1993

อีเมล

ninja@inky.com

รูปแบบอีเมลเป็นดังนี้ vimut@example.com

☒ ฉันยินยอมที่จะอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน Vimut Application

ต่อไป

941

Your account has been successfully created!

Welcome to Vimut TeleMed

To get started

Login

941

สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Vimut Application

กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

- กรณีผู้ปวยระบุ Format ของอีเมลผิด Format: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field อีเมล และข้อความแจ้งเตือน “รูปแบบของอีเมลเป็นดังนี้ vimut@example.com” ได้ Field อีเมล

- กรณีผู้ปวยระบุข้อมูลถูกต้อง: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวย
ระบุข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ดังนี้

The image shows two side-by-side mobile app screens for account creation. The left screen, titled 'Step 3/3: Create username and password', has three input fields: 'Username' (placeholder: 'Enter username'), 'Password' (placeholder: 'Enter new password'), and 'Confirm password' (placeholder: 'Re-enter password'). Below the password field is a note: 'Minimum 8 characters with a mix of letters, numbers and symbols'. The right screen, titled 'ขั้นตอนที่ 3/3: สร้างบัญชีผู้ใช้งาน', has three input fields: 'ชื่อผู้ใช้งาน' (placeholder: 'กรุณาระบุชื่อผู้ใช้งาน'), 'รหัสผ่าน' (placeholder: 'กรุณาระบุรหัสผ่าน'), and 'ยืนยันรหัสผ่าน' (placeholder: 'กรุณายืนยันรหัสผ่าน'). Below the password field is a note: 'รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์น้อย 1 ตัว'. Both screens have a 'Create account' button at the bottom.

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
ชื่อผู้ใช้งาน	Username	ผู้ปวยระบุข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน	1. เป็น Text Field และเป็น Require Field 2. จำกัดความยาว 30 ตัวอักษร 3. เงื่อนไขการตั้งชื่อผู้ใช้งานมีดังนี้: ไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร และต้องไม่มีอักขระพิเศษ
รหัสผ่าน	Password	ผู้ปวยระบุข้อมูลรหัสผ่าน	1. เป็น Text Field และเป็น Require Field 2. จำกัดความยาว 30 ตัวอักษร 3. เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่านมีดังนี้: ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

			4. เมื่อผู้ปวยระบบข้อมูลรหัสผ่าน หน้าจอแสดงแทนด้วยเครื่องหมาย • 5. เมื่อผู้ปวยกดที่สัญลักษณ์  ระบบแสดงรหัสผ่านที่ผู้ปวยระบุ และเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็น  และเมื่อกดอีกครั้ง ระบบจะแสดงรหัสผ่านเป็น • ดังเดิม
ยืนยันรหัสผ่าน	Confirm password	ผู้ปวยระบบข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน	1. เป็น Text Field และเป็น Require Field 2. จำกัดความยาว 30 ตัวอักษร 3. เมื่อผู้ปวยระบบข้อมูลยืนยัน รหัสผ่าน หน้าจอแสดงแทนด้วยเครื่องหมาย •
ปุ่ม สร้างบัญชี ผู้ใช้งาน	ปุ่ม Create account	ผู้ปวยกดปุ่มเมื่อต้องการ ดำเนินการต่อ	ปุ่มจะ Enable เมื่อผู้ปวยระบบข้อมูล ใน Require Field ครบถ้วน
ปุ่ม X		ผู้ปวยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิด หน้าจอ	เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม X ระบบแสดง หน้าจอ Main Page (Guest Mode)

- เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Create account ระบบทำการตรวจสอบ ข้อมูลที่ผู้ปวยระบุ ดังนี้

9:41

Step 3/3

Create username and password

Username

Usernames can contain letters (a-z), numbers (0-9), and periods (.)

Password

Minimum 8 characters with a mix of letters, numbers and symbols

Confirm password

Password does not match, please re-confirm

Create Account

9:41

ขั้นตอนที่ 3/3

สร้างบัญชีผู้ใช้ทำงาน

ชื่อผู้ใช้งาน

ชื่อผู้ใช้งานต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร และไม่มีอักขระพิเศษ

รหัสผ่าน

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

ยืนยันรหัสผ่าน


ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

สร้างบัญชีผู้ใช้ทำงาน

- กรณีผู้ปวยระบุ Username ตรงกับ Username ที่มีอยู่ในระบบ: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Username และแสดงข้อความแจ้งเตือน “มีชื่อผู้ใช้งานอยู่แล้วในระบบ” ได้ Field Username
- กรณีผู้ปวยระบุข้อมูลถูกต้อง: ระบบแสดงหน้าจอข้อความแจ้งเตือนผู้ปวย ดังนี้ “สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ” เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Login ระบบแสดงหน้าจอ Login เพื่อให้ผู้ปวยเข้าสู่ระบบ Vimut Application (อ้างอิงตาม Flow ในหัวข้อ Login: 4.6.2)

Login

1. เมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะ Guest Mode ผู้ป่วยสามารถเข้าเมนู Login ได้โดยการกดที่เมนูที่ต้องเมนูที่ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน
2. ระบบแสดงหน้าจอ Login เมื่อผู้ป่วยดำเนินการตามข้อ 1.

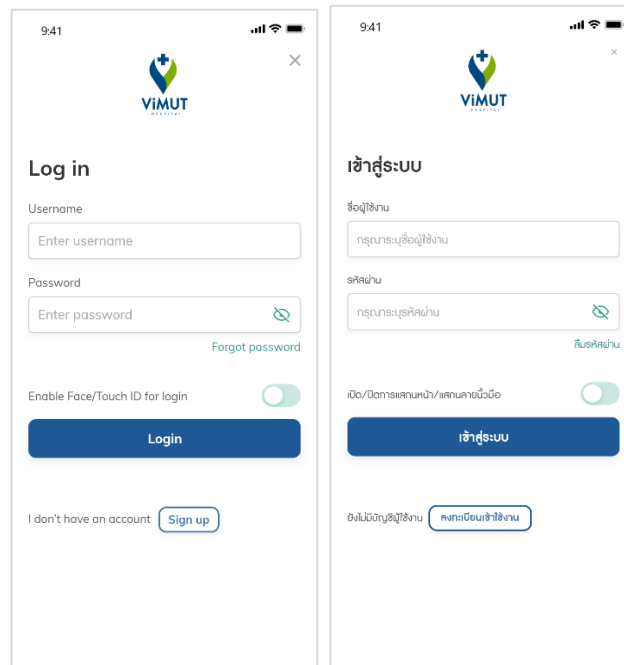


3. ผู้ป่วยระบุข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ ดังนี้

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
ชื่อผู้ใช้งาน	Username	ผู้ป่วยระบุข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน	เป็น Text Field และเป็น Require Field
รหัสผ่าน	Password	ผู้ป่วยระบุข้อมูลรหัสผ่าน	1. เป็น Text Field และเป็น Require Field 2. เมื่อผู้ป่วยระบุข้อมูลรหัสผ่าน หน้าจอแสดงแทนด้วยเครื่องหมาย • 3. เมื่อผู้ป่วยกดที่สัญลักษณ์  ระบบแสดงรหัสผ่านที่ผู้ป่วยระบุ และเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็น  และเมื่อกดอีกครั้ง

			ระบบจะแสดงรหัสผ่านเป็น • ดั้งเดิม
เปิด/ปิดการสแกนหน้า/สแกนลายนิ้วมือ	Enable Face/Touch ID for login	ผู้ปวยเปิด/ปิดการสแกนหน้า/สแกนลายนิ้วมือ  หมายถึง เปิดการสแกนหน้า/สแกนลายนิ้วมือ (Default)  หมายถึง ปิดการสแกนหน้า/สแกนลายนิ้วมือ	
ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน	ปุ่ม Forgot password	ผู้ปวยกดปุ่มลืมรหัสผ่านเมื่อต้องการตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่	เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Forgot password ระบบแสดงหน้าจอ Forgot Password ให้ผู้ปวยตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่
ปุ่ม เข้าสู่ระบบ	ปุ่ม Login	ผู้ปวยกดปุ่มเมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ	
ปุ่ม ลงทะเบียนเข้าใช้งาน	ปุ่ม Sign up	ผู้ปวยกดปุ่มเมื่อต้องการลงทะเบียนเข้าใช้งาน	เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Sign up ระบบแสดงหน้าจอ Create Account ให้ผู้ปวยสร้าง Account ใหม่
ปุ่ม X		ผู้ปวยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิดหน้าจอ	เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม X ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode)

4. ผู้ป่วยกดปุ่ม Login: ระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

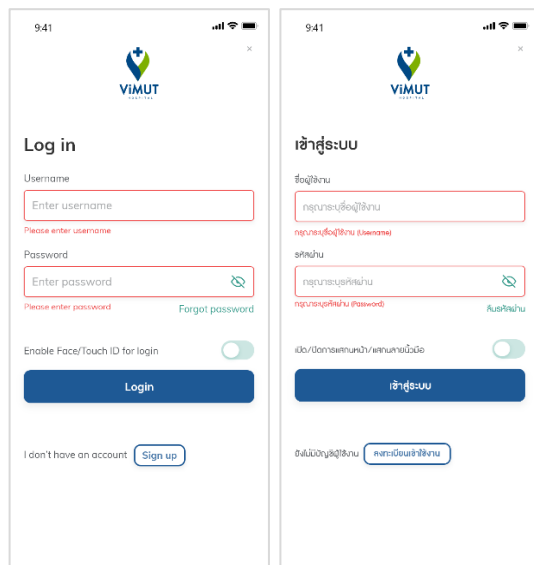

- 4.1. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุ Username: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Username และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username)” ได้ Field Username
- 4.2. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุ Password: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Password และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณารหัสผ่าน (Password)” ได้ Field Password
- 4.3. กรณีผู้ป่วยระบุ Username ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Username และแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่มีผู้ใช้งานนี้อยู่ในระบบ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง” ได้ Field Username
- 4.4. กรณีผู้ป่วยระบุ Password ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Password และแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้อง กรุณาระบุใหม่อีกครั้ง” ได้ Field Password
- 4.5. กรณีผู้ป่วยระบุ Username หรือ Password ไม่ถูกต้องครบ 3 ครั้ง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “คุณระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้องครบ 3 ครั้ง กรุณาตั้งคํารหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งาน” โดยเมื่อผู้ป่วยกดปิดข้อความแจ้งเตือน ระบบเปิดหน้าจอ Forgot Password ให้ผู้ป่วยตั้งคํารหัสผ่านใหม่

หมายเหตุ กรณีผู้ป่วย Login ด้วย Username A ผิดไป 2 ครั้ง และ Login ด้วย Username B ผิดในครั้งที่ 3 ระบบจะทำการเริ่มนับการ Login ด้วย Username B ผิดเป็นครั้งแรก

- 4.6. กรณีผู้ป่วยระบุข้อมูลถูกต้อง ระบบตรวจสอบข้อมูลดังนี้
 - 4.6.1. กรณีเป็นการ Login จากการที่ผู้ป่วยทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน แต่ระบบตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยมีบัญชีผู้ใช้งานในฐานข้อมูลโรงพยาบาลอยู่แล้ว และเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเปลี่ยน Device ในการ Login: ระบบทำการส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วยที่อยู่ในฐานข้อมูลโรงพยาบาล เป็นข้อความ “กรุณากรอก xxxxxx ใน [VIMUT App.] ภายใน x นาที” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาไทย

หรือ ส่งข้อความ “Please enter xxxxxx into [ViMUT App.] within the next x mins” กรณีผู้ปวยเลือกภาษา
ในตอนเริ่มต้นเข้า ViMUT Application เป็นภาษาอังกฤษ ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยระบุรหัส **OTP 6 หลัก**
เพื่อยืนยันตัวตน โดยรหัส OTP จะมีอายุ **5 นาที** โดยปุ่ม Continue จะ Enable ก็ต่อเมื่อผู้ปวยระบุรหัส OTP
เรียบร้อยแล้วเมื่อผู้ปวยระบุรหัส OTP เสร็จสิ้น เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Continue ระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

The image displays four screenshots of the ViMUT App's OTP verification interface, arranged in a 2x2 grid. Each screen shows a timer at the top indicating 'Code expires in 02:58'. The top two screens show the initial state where the user is prompted to enter a 6-digit code. The bottom two screens show the result of the verification attempt, with the entered code '239104' displayed in red boxes. The bottom-left screen shows a 'Sorry, the OTP is incorrect' message, while the bottom-right screen shows a 'รหัส OTP ไม่ถูกต้อง' (OTP code is incorrect) message. Each screen includes a 'Resend code' link and a 'Continue' button. A numeric keypad is visible at the bottom of each screen.

English version (top-left):

Code expires in 02:58

Verify your number with the code sent to 0XX-XXX-7168

Resend code

Continue

Thai version (top-right):

รหัสจะหมดอายุภายใน 02:58

รหัส OTP ถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ 0XX-XXX-7168

ส่งรหัสใหม่

ต่อไป

English version (bottom-left):

Code expires in 02:58

Verify your number with the code sent to 0XX-XXX-7168

2 3 9 1 0 4

Sorry, the OTP is incorrect

Resend code

Continue

Thai version (bottom-right):

รหัสจะหมดอายุภายใน 02:58

รหัส OTP ถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ 0XX-XXX-7168

2 3 9 1 0 4

รหัส OTP ไม่ถูกต้อง

ส่งรหัสใหม่

ต่อไป

4.6.1.1. กรณีผู้ปวยระบุ OTP ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field ระบุรหัส OTP และแสดงข้อความ
แจ้งเตือน “รหัส OTP ไม่ถูกต้อง” ใต้ Field ระบุรหัส OTP


4.6.1.2. กรณีผู้ป่วยระบุ OTP ที่หมดอายุ: ระบบกรอบสีแดงที่ Field ระบุรหัส OTP แสดงข้อความแจ้งเตือน
“รหัส OTP หมดอายุ” ได้ Field ระบุรหัส OTP

4.6.1.3. กรณีผู้ป่วยระบุรหัส OTP ถูกต้อง:


4.6.1.3.1. ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยตั้งรหัส PIN: ระบบตรวจสอบการเปิดใช้งานฟังก์ชัน

Biometrics ของโทรศัพท์ผู้ป่วย:

- กรณีโทรศัพท์ของผู้ป่วยเปิดฟังก์ชัน Biometrics: ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเตือนขอ
อนุญาตใช้งาน Face ID/Touch ID

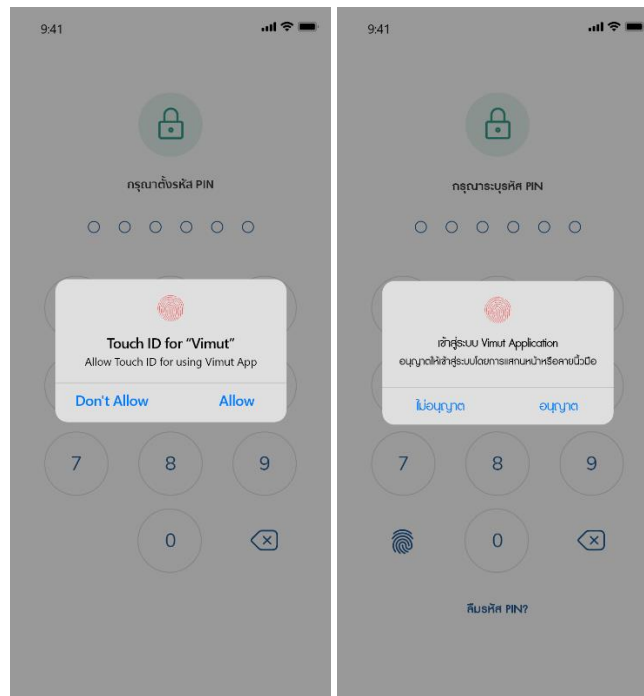

- กรณีผู้ป่วยกด Allow: ระบบเปิดใช้งาน Face ID/Touch ID ในการเข้าใช้
งาน Vimut Application และกลับไปแสดงหน้าจอตั้งรหัส PIN
- กรณีผู้ป่วยกด Don't Allow: ระบบปิดใช้งาน Face ID/Touch ID ในการ
เข้าใช้งาน Vimut Application และกลับไปแสดงหน้าจอตั้งรหัส PIN
- กรณีโทรศัพท์ของผู้ป่วยปิดฟังก์ชัน Biometrics: ระบบแสดงหน้าจอตั้งรหัส PIN ให้
ผู้ป่วยตั้งรหัส PIN

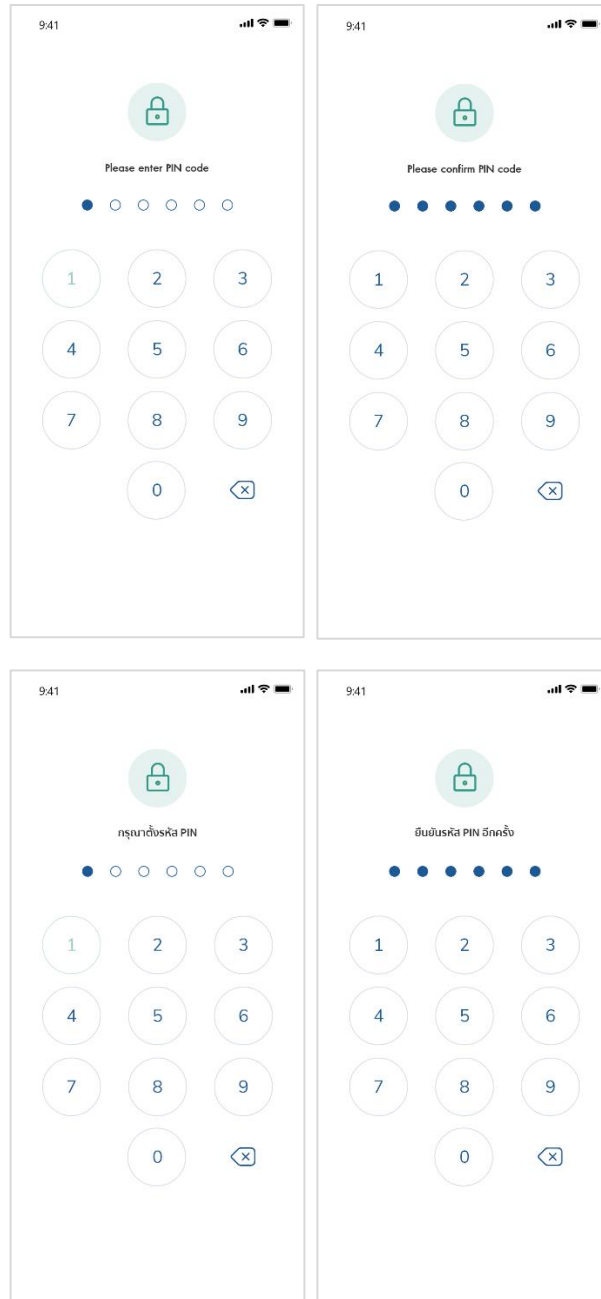


- กรณีผู้ป่วยระบุรหัส PIN เสร็จสิ้น: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง
 - กรณีผู้ป่วยยืนยันรหัส PIN ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งเตือน “กรุณายืนยันรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง” ให้ผู้ป่วยระบุรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง
 - กรณีผู้ป่วยยืนยันรหัส PIN ถูกต้อง: ระบบแสดงหน้าจอ Terms and Conditions (กรณีที่ผู้ป่วยเปลี่ยน Device ในการ Login ระบบตรวจสอบทุกครั้งว่ามีการอัปเดตเวอร์ชันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานหรือไม่)

ถ้ามีการอัปเดตเวอร์ชัน ระบบแสดงหน้าจอ Terms and Conditions เพื่อให้ผู้ปวยกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอีกครั้ง กรณีที่ไม่มีมีการอัปเดตเวอร์ชัน ระบบเช็คเงื่อนไขว่าต้องแสดงหน้าจอขออนุญาตเข้าเข้าถึงการแจ้งเตือน และต้องแสดงหน้าจอ Welcome Page หรือไม่ หากไม่ต้องแสดง ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Logged in))

The image shows two side-by-side mobile app screens. The left screen displays a 'Terms & Conditions' dialog with a title bar, a paragraph of placeholder text, a section header '1. Stet clita kasd gubergren', another paragraph, and a checkbox labeled 'I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy'. Below the checkbox is a grey 'Accept' button. The right screen displays a confirmation dialog titled 'ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน' with similar placeholder text and a checkbox labeled 'ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Vimut Application'. Below the checkbox is a grey 'ยอมรับ' (Accept) button.

- ผู้ปวยอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้งาน Application และเลือก Check หรือ Uncheck Checkbox ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้งาน Application
 - ☐ หมายถึง ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้งาน Application ระบบทำการ Disable ปุ่ม Accept
 - ☒ หมายถึง ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าใช้งาน Application ระบบทำการ Enable ปุ่ม Accept
- ผู้ปวยกดปุ่ม Accept เพื่อดำเนินการ: ระบบแสดงหน้าจอขออนุญาตเข้าเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ปวย (หน้าจอขออนุญาตเข้าเข้าถึงการแจ้งเตือนจะแสดงเมื่อเป็นการ Login ครั้งแรกของแต่ละบัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น)

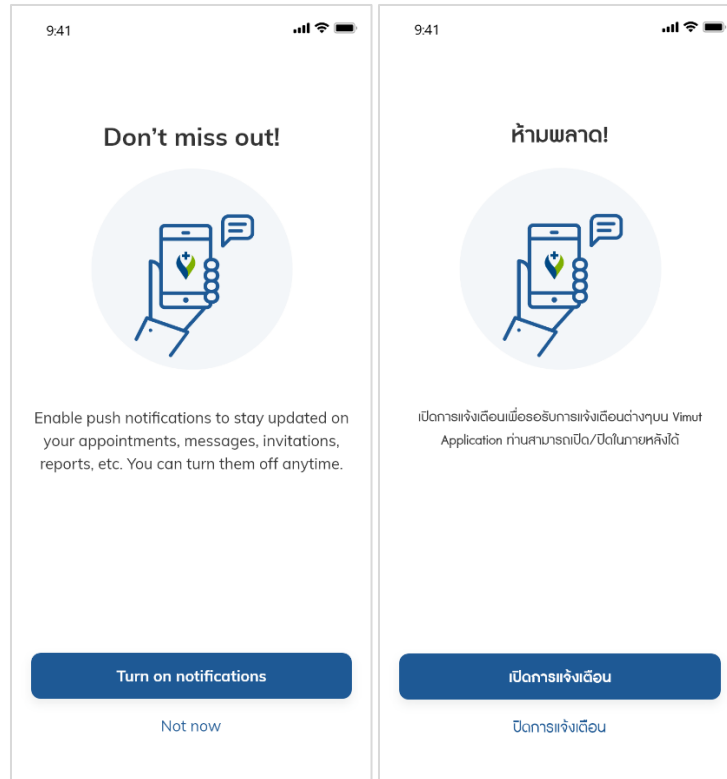

- Turn on notification หมายถึง อนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย: เมื่อผู้ป่วย


เลือก Turn on notification ระบบสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือน
ต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วยได้ และแสดงหน้าจอ Welcome
Page (หน้าจอ Welcome Page จะแสดงเมื่อเป็นการ Login
ครั้งแรกของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆเท่านั้น) เพื่อพาผู้ป่วยเข้าไปยัง
หน้าจอ Main Page (Logged in Mode) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใช้
งาน Vimut Application

- Not now หมายถึง ไม่อนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึง
การแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย: เมื่อผู้ป่วยเลือก Not
now ระบบจะไม่สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์
ของผู้ป่วยได้ และแสดงหน้าจอ Welcome Page (แสดงเมื่อ
เป็นการ Login ครั้งแรกของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆเท่านั้น) เพื่อพา
ผู้ป่วยเข้าไปยังหน้าจอ Main Page (Logged in Mode) เพื่อให้
ผู้ป่วยเข้าใช้งาน Vimut Application

4.6.2. กรณีเป็นการ Login หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยตั้งรหัส PIN 6 หลัก


4.6.2.1. ระบบตรวจสอบการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Biometrics ของโทรศัพท์ผู้ป่วย:

4.6.2.1.1. กรณีโทรศัพท์ของผู้ป่วยเปิดฟังก์ชัน Biometrics: ระบบแสดงหน้าจอแจ้งเตือนขอ
อนุญาตใช้งาน Face ID/Touch ID

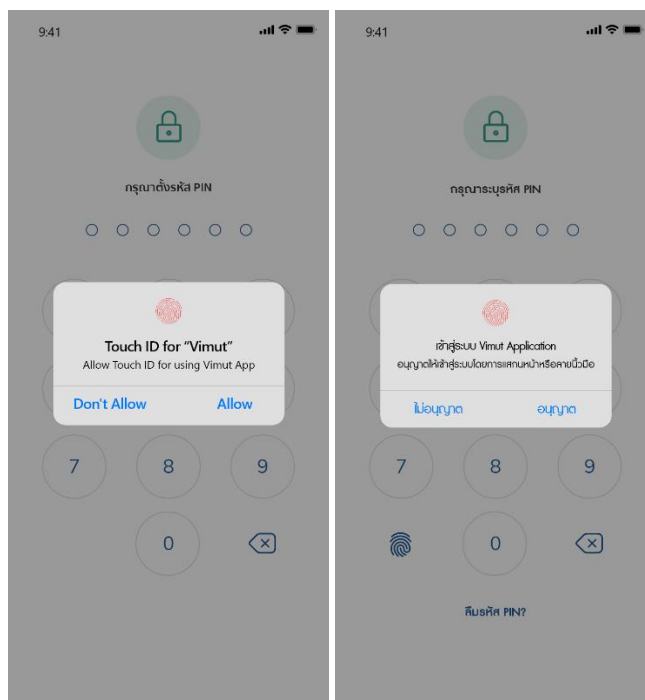



- กรณีผู้ป่วยกด Allow: ระบบเปิดใช้งาน Face ID/Touch ID ในการเข้าใช้งาน Vimut Application และกลับไปแสดงหน้าจอตั้งรหัส PIN
- กรณีผู้ป่วยกด Don't Allow: ระบบปิดใช้งาน Face ID/Touch ID ในการเข้าใช้งาน Vimut Application และกลับไปแสดงหน้าจอตั้งรหัส PIN

4.6.2.1.2. กรณีโทรศัพท์ของผู้ป่วยปิดฟังก์ชัน Biometrics: ระบบแสดงหน้าจอตั้งรหัส PIN ให้ผู้ป่วยตั้งรหัส PIN

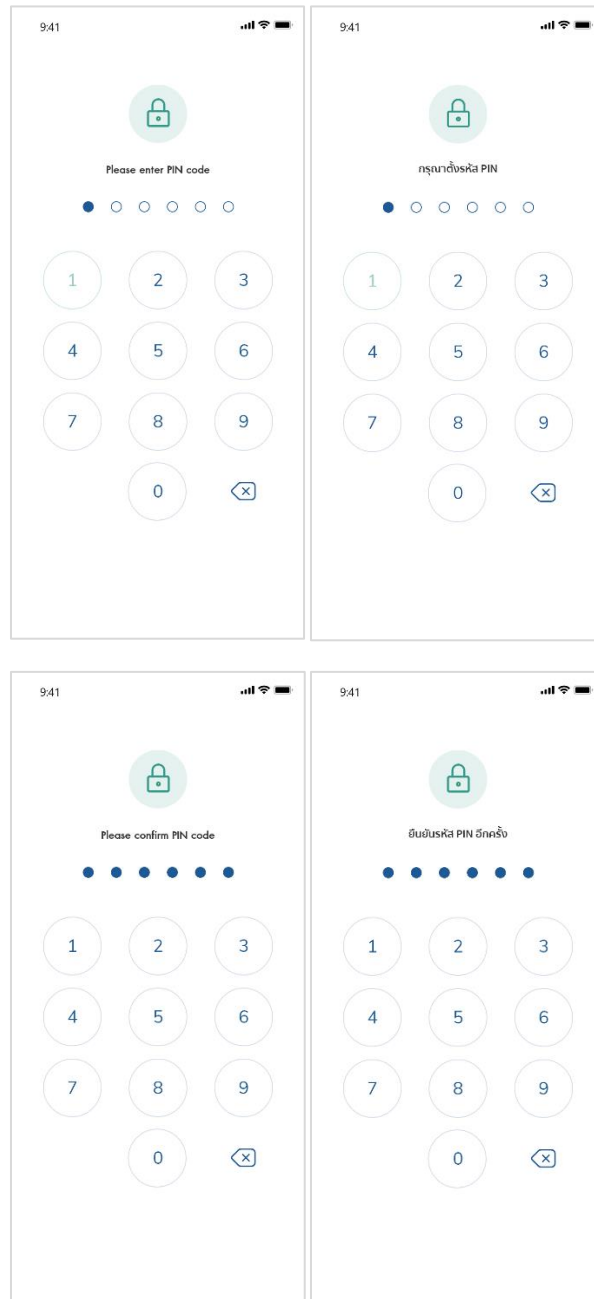

- กรณีผู้ป่วยระงับรหัส PIN เสร็จสิ้น: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยยืนยันรหัส PIN อีกครั้ง
 - กรณีผู้ป่วยยืนยันรหัส PIN ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณายืนยันรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง” ให้ผู้ป่วยระงับรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง
 - กรณีผู้ป่วยยืนยันรหัส PIN ถูกต้อง: ระบบแสดงหน้าจอขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย (หน้าจอขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนจะแสดงเมื่อเป็นการ Login ครั้งแรกของแต่ละบัญชีผู้ใช้งานเท่านั้น)

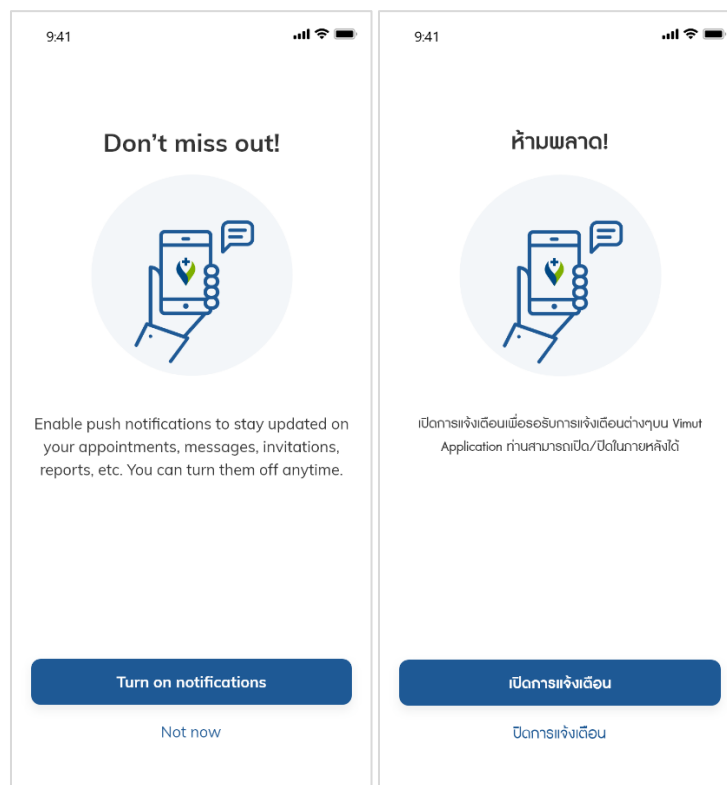


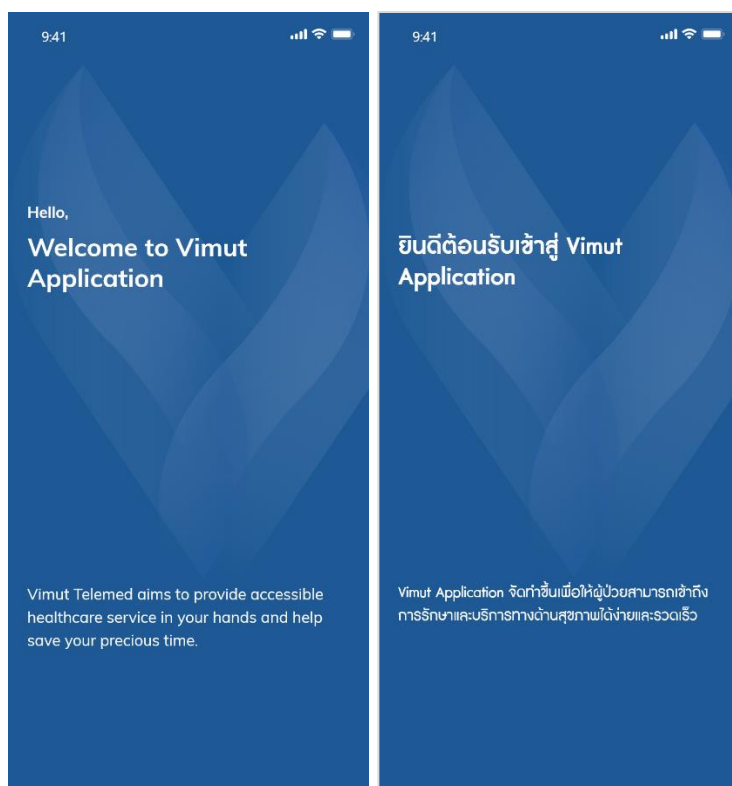

- Turn on notification หมายถึง อนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย: เมื่อผู้ป่วยเลือก Turn on notification ระบบสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วยได้ และแสดงหน้าจอ Welcome Page (หน้าจอ Welcome Page จะแสดงเมื่อเป็นการ Login ครั้งแรกของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆเท่านั้น) เพื่อพาผู้ป่วยเข้าไปยังหน้าจอ Main Page (Logged in Mode) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใช้งาน Vimut Application
- Not now หมายถึง ไม่อนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย: เมื่อผู้ป่วยเลือก Not now ระบบจะไม่สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนต่างๆบนโทรศัพท์ของผู้ป่วยได้ และแสดงหน้าจอ Welcome Page (แสดงเมื่อเป็นการ Login ครั้งแรกของโทรศัพท์เครื่องนั้นๆเท่านั้น) เพื่อพาผู้ป่วยเข้าไปยังหน้าจอ Main Page (Logged in Mode) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใช้งาน Vimut Application

4.6.3. กรณีผู้ป่วย Login ใน Device เดิม: ระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

4.6.3.1. กรณีผู้ป่วยเปิดใช้งาน Biometrics: ระบบแสดงหน้าจอให้เข้าใช้งานด้วย Touch ID/Face ID

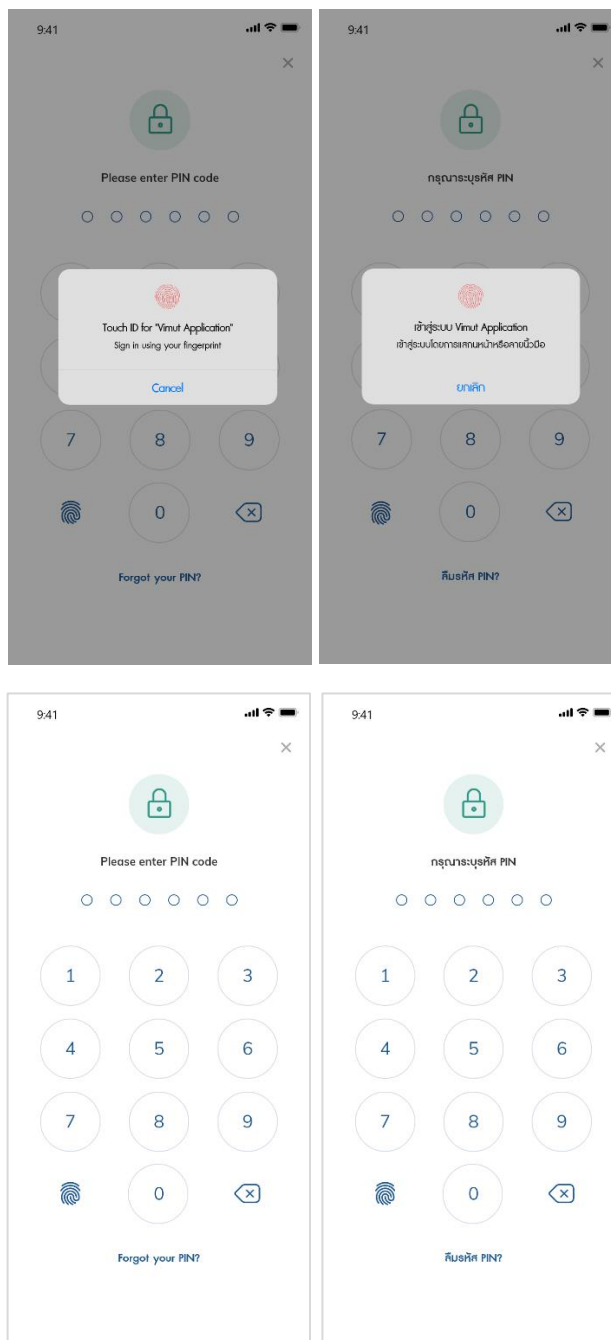

4.6.3.1.1. กรณีสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนหน้าผ่าน: ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Logged in Mode)

4.6.3.1.2. กรณีสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนหน้าไม่ผ่าน: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ป่วยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนหน้าใหม่อีกครั้ง

4.6.3.1.3. ผู้ป่วยกดปุ่ม Cancel เมื่อต้องการเข้าระบบด้วยช่องทางอื่น โดยระบบจะแสดงหน้าจอระบบรหัส PIN


4.6.3.1.4. ผู้ป่วยกดปุ่ม  กรณีต้องการกลับมาเข้าสู่ระบบด้วยการสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนหน้า

4.6.3.1.5. ผู้ป่วยกดปุ่ม  เมื่อต้องการแก้ไขรหัส PIN ที่ระบุ

4.6.3.1.6. ผู้ป่วยกดปุ่ม Forgot your PIN? เมื่อลืมรหัส PIN โดยระบบจะแสดงหน้าจอ Login โดยเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password สำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ป่วยระบุรหัส PIN ใหม่ที่ต้องการตั้ง

4.6.3.1.7. ผู้ป่วยกดปุ่ม X เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password โดยระบบจะแสดงหน้าจอ Log in กรณีผู้ป่วย Login ด้วย Username และ Password เดิม ระบบจะทำการขำ้มการตั้งค่า PIN ใหม่ โดยในครั้งต่อไปผู้ป่วยจะยังสามารถ Login เข้าใช้งานได้ด้วยรหัส PIN เดิมได้ กรณีผู้ป่วย Login ด้วย Username และ Password อื่น ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ผู้ป่วยตั้งค่ารหัส PIN ใหม่

4.6.3.2. กรณีผู้ป่วยไม่ได้เปิดใช้งาน Biometrics: ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ผู้ป่วยระบุรหัส PIN

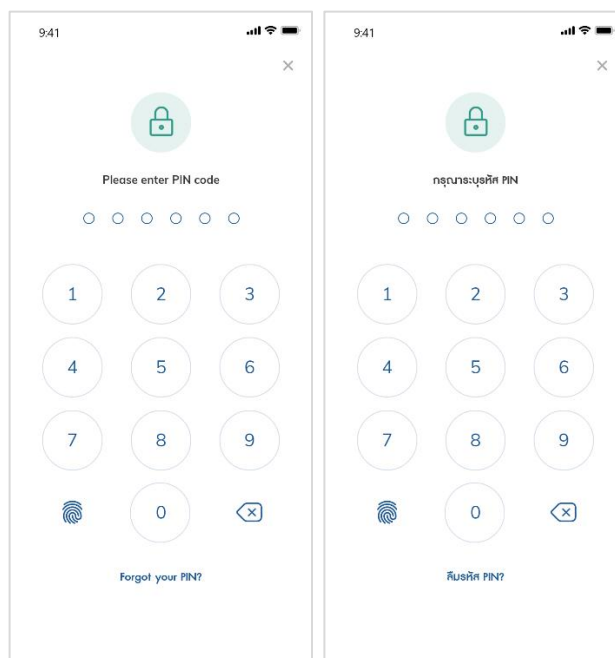

4.6.3.2.1. กรณีผู้ป่วยระบุรหัส PIN ถูกต้อง: ระบบดำเนินการต่อในข้อ 4.6.3.3

4.6.3.2.2. กรณีผู้ป่วยระบุรหัส PIN ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัส PIN ไม่ถูกต้อง กรุณาระบุใหม่อีกครั้ง” ให้ผู้ป่วยระบุรหัส PIN ใหม่อีกครั้ง โดยสามารถใส่ PIN ผิดได้ไม่จำกัดครั้ง


4.6.3.2.3. ผู้ป่วยกดปุ่ม  เมื่อต้องการแก้ไขรหัส PIN ที่ระบุ

4.6.3.2.4. ผู้ป่วยกดปุ่ม Forgot your PIN? เมื่อลืมรหัส PIN โดยระบบจะแสดงหน้าจอ Login โดยเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password สำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ผู้ป่วยระบุรหัส PIN ใหม่ที่ต้องการตั้ง

4.6.3.2.5. ผู้ป่วยกดปุ่ม X เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password โดนระบบจะแสดงหน้าจอ Login กรณีผู้ป่วย Login ด้วย Username และ Password เดิม ระบบจะทำการข้ามการตั้งค่า PIN ใหม่ โดยในครั้งต่อไปผู้ป่วยจะยังสามารถ Login เข้าใช้งานได้ด้วยรหัส PIN เดิมได้ กรณีผู้ป่วย Login ด้วย Username และ Password อื่น ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ผู้ป่วยตั้งค่ารหัส PIN ใหม่

4.6.3.3. ระบบตรวจสอบข้อมูลเวอร์ชันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

4.6.3.3.1. กรณีระบบตรวจสอบพบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเวอร์ชันใหม่: ระบบแสดงหน้าจอ Terms and Conditions

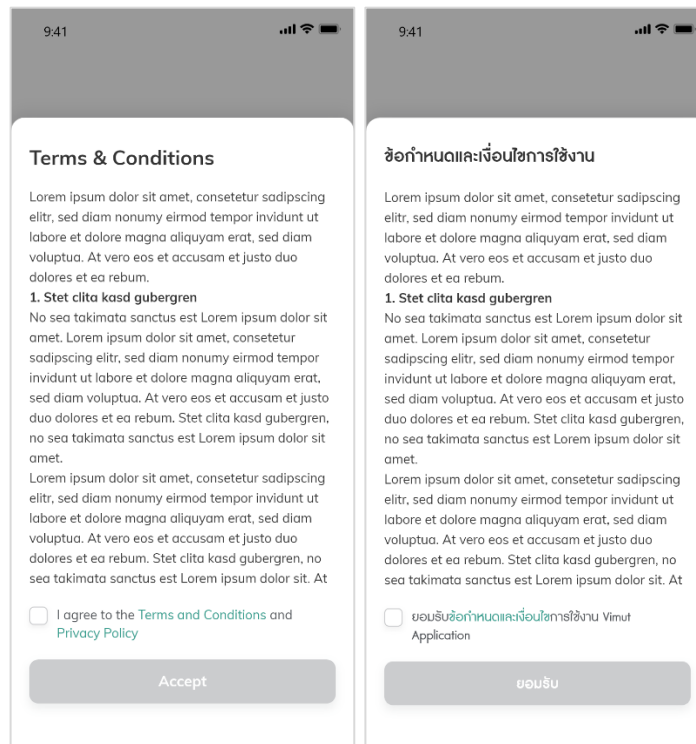

- ผู้ป่วยอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application และเลือก Check หรือ Uncheck Checkbox ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application
 - ☐ หมายถึง ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application ระบบทำการ Disable ปุ่ม Accept

- ☒ หมายถึง ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Application
ระบบทำการ Enable ปุ่ม Accept
- ผู้ปวยกดปุ่ม Accept เพื่อดำเนินการ: ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Logged
in Mode)

4.6.3.3.2. กรณีระบบตรวจสอบพบว่าไม่มีข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเวอร์ชันใหม่: ระบบ
แสดงหน้าจอ Main Page (Logged in Mode)

Forgot Password

1. เมื่อผู้ป่วยลืมรหัสผ่าน ผู้ป่วยสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยการกดที่เมนูที่ต้องเมนูที่ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน
2. ระบบแสดงหน้าจอ Login เมื่อผู้ป่วยดำเนินการตามข้อ 1.

9:41

VIMUT

Log in

Username

Enter username

Password

Enter password

[Forgot password](#)

Enable Face/Touch ID for login

Login

I don't have an account [Sign up](#)


3. ผู้ป่วยกดปุ่ม Forgot password: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยระบุข้อมูล ดังนี้


The image displays four screenshots of the VIMUT app's 'Forgot your password?' screen, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows the app's header with the VIMUT logo and a close button. The screen is titled 'Forgot your password?' with a lock icon. Below the title, there is a prompt: 'Please enter your ID or passport number registered with Vimut to receive OTP'. The first two screenshots are for a user with Thai nationality ('Thailand'). The first has an 'ID Card' field, and the second has a 'เลขบัตรประชาชน' (ID Card Number) field. The last two screenshots are for a user with Italian nationality ('Italy'). The first has a 'Passport No.' field, and the second has a 'เลขหนังสือเดินทาง' (Passport Number) field. All screens have a 'Continue' button at the bottom.

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
สัญชาติ	Nationality	ผู้ป่วยเลือกสัญชาติ	1. เป็น Dropdown List 2. Default เป็นสัญชาติไทย 3. เมื่อผู้ป่วยกดที่ Field Nationality ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวย

			ค้นหาสัญชาติ (อ้างอิง Flow 3.1: Forgot Password)
เลขบัตรประชาชน	ID Card	ผู้ปวยระบุข้อมูลเลขบัตรประชาชน	1. ระบบแสดง Field นี้เมื่อผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติไทย 2. เป็น Text Field และเป็น Require Field 3. จำกัดความยาว 13 ตัวอักษร
เลขที่หนังสือเดินทาง	Passport No.	ผู้ปวยระบุข้อมูลเลขที่หนังสือเดินทาง	1. ระบบแสดง Field นี้เมื่อผู้ปวยเลือกสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นๆ นอกจากสัญชาติไทย 2. เป็น Text Field และเป็น Require Field
ปุ่ม ต่อไป	ปุ่ม Continue	ผู้ปวยกดปุ่มเมื่อต้องการดำเนินการตั้งค่างรหัสผ่านใหม่	
ปุ่ม X		ผู้ปวยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิดหน้าจอ	เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม X ระบบแสดงหน้าจอ Login

3.1. เมื่อผู้ปวยกดที่ Field Nationality ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยค้นหาข้อมูลสัญชาติ ดังนี้

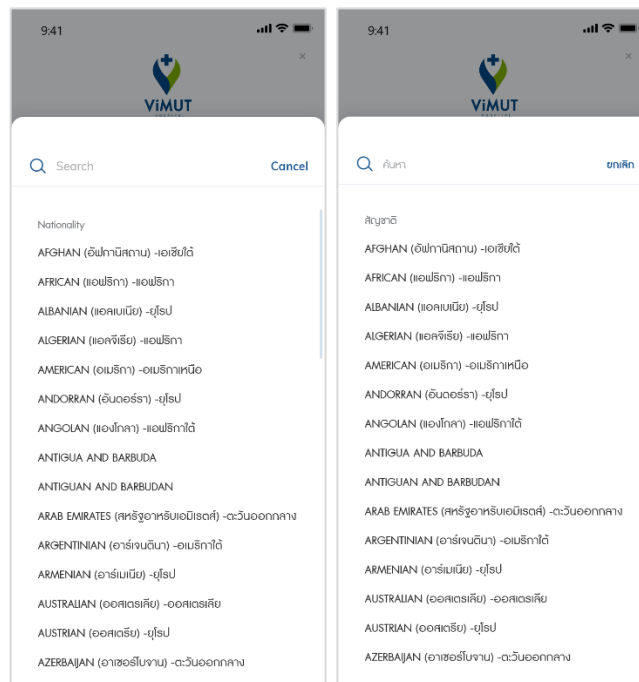

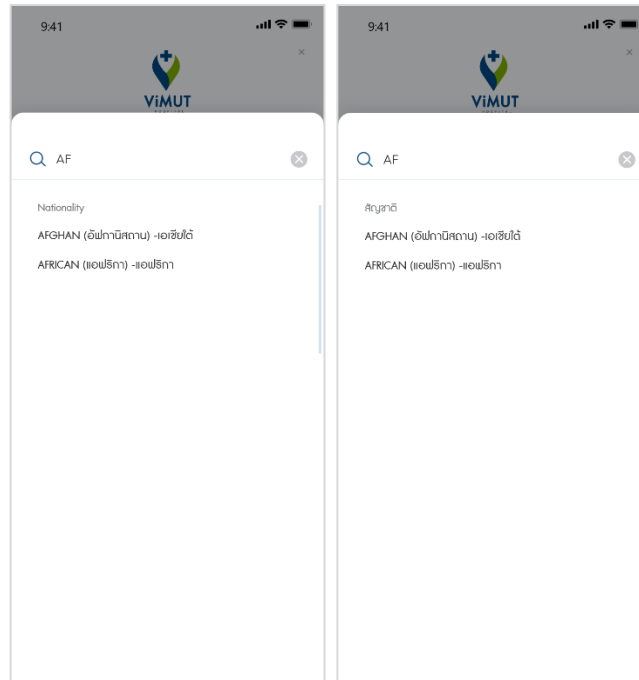

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
Q Search Cancel Q AF x		ผู้ปวยระบุข้อมูลเพื่อค้นหา	1. เป็น Text Field ให้ผู้ปวยระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา 2. เป็นการค้นหาแบบ Realtime เมื่อผู้ปวยระบุข้อมูล ระบบจะทำการกรองข้อมูลให้ทันที 3. เมื่อผู้ปวยกดที่ Field และระบุข้อมูล ระบบจะเปลี่ยนการแสดงผลปุ่ม Cancel เป็นปุ่ม  เพื่อให้ผู้ปวยกดเพื่อ Clear การค้นหา 4. เมื่อผู้ปวยกดปุ่ม Cancel ระบบแสดงหน้าจอระบุข้อมูลเพื่อตั้งค่าน์รหัสผ่านใหม่ (อ้างอิง Flow 3.: Forgot Password)
สัญชาติ AFGHAN (อัฟกานิสถาน) -เอเชียใต้ AFRICAN (แอฟริกา) -แอฟริกา ALBANIAN (แอลเบเนีย) -ยุโรป ALGERIAN (แอลจีเรีย) -แอฟริกา		แสดงรายการข้อมูลสัญชาติ	1. เมื่อผู้ปวยกดเลือกรายการข้อมูลระบบทำการปิดหน้าจอค้นหาแล้ว Prefill ข้อมูลที่ผู้ปวยเลือกที่ช่อง Nationality

		2. ระบบแสดงข้อมูลตามตาราง Master Natioality (อ้างอิง Flow 3.2: Forgot Password)
--	--	---

3.2. ตารางข้อมูล Master Natioality

3.2.1. กรณีผู้ปวยเลือกภาษาบน Vimut Application เป็นภาษาอังกฤษ: ระบบแสดงลำดับข้อมูล ดังนี้

NO	Nationality (EN)
1	AFGHAN
2	AFRICAN
3	ALBANIAN
4	ALGERIAN
5	AMERICAN
6	ANDORRAN
7	ANGOLAN
8	ANTIGUA AND BARBUDA
9	ANTIGUAN AND BARBUDAN
10	ARAB EMIRATES
11	ARGENTINIAN
12	ARMENIAN
13	AUSTRALIAN
14	AUSTRIAN
15	AZERBAIJAN
16	BAHAMIAN
17	BAHRAINI
18	BANGLADESHI
19	BARBADIAN
20	BELARUSIAN
21	BELGIUM
22	BELIZEAN
23	BENINESE
24	BENINESE

25	BERMUDIAN
26	BHUTANI
27	BOLIVIAN
28	BOSNIA
29	BOSNIA AND HERZEGOVINA
30	BOTSWANA
31	BRAZILIAN
32	BRITISH
33	BRUNEIAN
34	BULGARIA
35	BURKINA FASO
36	BURUNDIAN
37	CAMBODIAN
38	CAMEROONIAN
39	CANADIAN
40	CAPE VERDEAN
41	CAYMANIAN
42	CHADIAN
43	CHILEAN
44	CHINA-THAI
45	CHINESE
46	COLOMBIAN
47	COMORIENNE
48	CONGOLESE
49	Co-operative Republic of Guyana
50	COSTA RICAN
51	CROATIAN
52	CUBAN
53	CYPRIOT
54	CZECH
55	DANISH
56	DJIBOUTI

57	DOMINICAN
58	DUBAI
59	DUTCH
60	ECUADORIAN
61	EGYPTIAN
62	EQUATORIAL GUINEA
63	ERITREA
64	ESPANOLA
65	ESTONIAN
66	ETHIOPIAN
67	FIJIAN
68	FILIPINO
69	FINNISH
70	FRENCH
71	GABONESE
72	GAMBIAN
73	GEORGIAN
74	GERMAN
75	GHANAIAAN
76	GREENLANDER
77	GUATEMALAN
78	GUINEA
79	GUINEAN
80	GUYANESE
81	HAITIAN
82	Hellenic (greek)
83	HONDURAN
84	HONG KONG
85	HUNGARIAN
86	IBERIAN
87	ICELANDIC
88	INDIAN

89	INDIA-THAI
90	INDONESIAN
91	IRANIAN
92	IRAQI
93	IRISH
94	ISRAELI
95	ITALIAN
96	IVORY COAST [IVORIAN]
97	JAMAICAN
98	JAPANESE
99	JAPAN-THAI
100	JORDANIAN
101	KASHMIRI
102	KAZAK
103	KENYAN
104	KITTITIAN (s), NEVISIAN (s)
105	KOREAN NORTH
106	KOREAN SOUTH
107	KOREA-THAI
108	KOSOVO
109	KUWAITI
110	KYRGYZ
111	Lahu
112	LAOTIAN
113	LATVIAN
114	LEBANESE
115	LIBERIAN
116	LIBYAN
117	LIECHTENSTEIN
118	LITHUANIAN
119	LUXEMBOURGER
120	MACEDONIAN

121	MALAGASY
122	MALAWIAN
123	MALAYSIAN
124	MALBILIAN
125	MALDIVIAN
126	MALIAN
127	MALTESE
128	MASHALLESE
129	MAURETANIAN
130	MAURITIAN
131	MEXICAN
132	MICRONESIAN
133	MOLDOVAN
134	MONEGASQUE
135	MONGOLIAN
136	MONTENEGRINS
137	MOROCCAN
138	MOSOTHO
139	MOZAMBICAN
140	MYANMAR
141	NAMIBIAN
142	NAURUAN
143	NEPALESE
144	NEW ZEALANDER
145	NICARAGUAN
146	NIGER
147	NIGERIAN
148	NORWEGIAN
149	OMANI
150	PAKISTANI
151	PALESTINIAN
152	PANAMANIAN

153	PAPUAN
154	PARAQUAYAN
155	PERUVIAN
156	POLISH
157	PORTUGUESE
158	PUERTORICAN
159	PUERTORICO
160	QATARI
161	Republic of Sierra Leone
162	Republica Moldova
163	ROMANIAN
164	RUSSIAN
165	RWANDA
166	SAINT KITTS AND NEVIS
167	SALVADORAN
168	Sammarinese
169	SAMOAN
170	SAN MARINO
171	SAUDI
172	SCOTTISH
173	SENEGALESE
174	SERB
175	SERBIAN
176	Seychellois
177	SIERRA LEONEAN
178	SINGAPOREAN
179	SLOVAK
180	SLOVENE
181	SOLOMON ISLANDER
182	SOMALI
183	SOUTH AFRICAN
184	SOUTH SUDAN

185	SPANISH
186	SRILANKAN
187	SRPSKO
188	St. Kitts and Nevis
189	SUDANESE
190	SWAZILAND
191	SWEDISH
192	SWISS
193	SYRIA
194	SYRIAN
195	Taihue
196	TAIWANESE
197	TAJIK
198	TANZANIAN
199	THAI
200	TIBETAN
201	TIMORESE
202	TOGOLESE
203	TONGA
204	TRINIDADIAN
205	TUNISIAN
206	TURKISH
207	TURKMENISTAN
208	TUVALUAN
209	UGANDAN
210	UKRAINIAN
211	URUGUAYAN
212	UZBEK
213	VANUATU
214	VATICANIAN
215	VENEZUELAN
216	VIETNAMESE

217	VINCENTIAN
218	WELSH
219	YEMENI
220	YUGOSLAVIA
221	ZAIRESE
222	ZAMBIAN
223	ZCEHCOSLOVAKIA
224	ZIMBABWEAN

3.2.2. กรณีผู้ปวยเลือกภาษาบน Vimut Application เป็นภาษาไทย: ระบบแสดงลำดับข้อมูล ดังนี้

NO	Nationality (TH)
1	ANTIGUA AND BARBUDA
2	ANTIGUAN AND BARBUDAN
3	CAPE VERDEAN
4	Hellenic (greek)
5	IVORY COAST [IVORIAN]
6	MALBILIAN
7	MONTENEGRINS
8	St. Kitts and Nevis
9	ZAIRESE
10	ZCEHCOSLOVAKIA
11	กรีนแลนด์
12	กัมพูชา
13	กัวเตมาลา
14	กาตาร์
15	กานา
16	กาบองนิส
17	กายอานา
18	กิวินี
19	กีเนียน
20	เกาหลีใต้

21	เกาหลีเหนือ
22	แกมเบีย
23	คองโก
24	คอซตาริกา
25	คาซัคสถาน
26	คิวบา
27	คีร์กีซสถาน
28	คูเวต
29	เคนยา
30	แคชเมียร์
31	แคนาดา
32	แคเมอรูน
33	โคโซโว
34	โคโมโรส
35	โครเอเชีย
36	โคลัมเบีย
37	จอร์เจีย
38	จอร์แดน
39	จาเมกา
40	จิบูตี
41	จีน
42	ชาด
43	ชิลี
44	เซเชลส์
45	เชื้อชาติเกาหลี สัญชาติไทย
46	เชื้อชาติจีน สัญชาติไทย
47	เชื้อชาติญี่ปุ่น สัญชาติไทย
48	เชื้อชาติอินเดีย สัญชาติไทย
49	ชานมารีโน
50	ชานมารีโน
51	ซามัวตะวันตก
52	ซาอุดีอาระเบีย

53	ซิมบับเว
54	ซีเรีย
55	ซีเรีย
56	ซูดาน
57	เซนต์คิตส์และเนวิส
58	เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
59	เซเนกัล
60	เซอร์เบีย
61	เซอร์เบีย
62	เซาท์ซูดาน
63	เซียร์รา เลโอน
64	แซมเบีย
65	โซมาเลีย
66	ไซปรัส
67	ญี่ปุ่น
68	ดูไบ
69	โดมินีกา
70	ตองกา
71	ตองโกเลีย
72	ติมอร์
73	ตุรกี
74	ตูนิเซีย
75	ตูวาลู
76	เติร์กเมนิสถาน
77	ไต้หวัน
78	ทรินิแดด
79	ทาจิกิสถาน
80	ทิเบต
81	แทนซาเนีย
82	ไทย
83	ไทลื้อ - ชาวไทยภูเขา
84	นย

85	นอร์เวย์
86	นามิเบีย
87	นิการากัว
88	นิวซีแลนด์
89	เนเธอร์แลนด์
90	เนปาล
91	ไนจีเรีย
92	ไนเจอร์
93	บราซิล
94	บรูไน
95	บอตสวานา
96	บอสเนีย
97	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
98	บังคลาเทศ
99	บัลแกเรีย
100	บาเบโดส
101	บาร์เรน
102	บาฮามัส
103	บุรุนดี
104	บูร์กินาฟาโซ
105	เบนิน
106	เบลเยียม
107	เบลารุส
108	เบลีซ
109	เบอร์มิวดา
110	โบลีเวีย
111	ปากีสถาน
112	ปานามา
113	ปาปัว นิวกินี
114	ปาปัวนิวกินี
115	ปารากวัย
116	ปาเลสไตน์


117	เปรู
118	เปอโตริโก
119	เปอร์โตริโก
120	โปรตุเกส
121	โปแลนด์
122	ฝรั่งเศส
123	พม่า
124	ฟิลิ
125	ฟินแลนด์
126	ฟิลิปปินส์
127	ภูฏาน
128	มองโกเลีย
129	มอริเชียส
130	มอริเตเนีย
131	มอลตา
132	มัลดีฟส์
133	มาซิโดเนีย
134	มาดากัสการ์
135	มาลาวี
136	มาลี
137	มาเลเชีย
138	เม็กซิโก
139	ไมซ์มบิก
140	โมโตวา
141	โมนาโก
142	โมร็อกโก
143	ไมโครนีเชีย
144	ยูกันดา
145	ยูโกสลาเวีย
146	ยูโกสลาเวีย
147	ยูเครน
148	เยเมน

149	เยอรมัน
150	วันดา
151	โรมาเนีย
152	ลักเซมเบิร์ก
153	ลัตเวีย
154	ลาว
155	ลาหู่-ชาวไทยภูเขา
156	ลิกเทนสไตน์
157	ลิทัวเนีย
158	ลิเบีย
159	เลโซโท
160	เลบานอน
161	ไลบีเรีย
162	วาติกันซิตี
163	วานูอาตู
164	เวเนซุเอลา
165	เวลส์
166	เวียดนาม
167	ศรีลังกา
168	สกอตแลนด์
169	สเปน
170	สโลวะเกีย
171	สโลวีเนีย
172	สวาซีแลนด์
173	สวิตเซอร์แลนด์
174	สวีเดน
175	สหพันธรัฐเชนคิสส์ละเนวิส
176	สหพันธรัฐรัสเซีย
177	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
178	สาธารณรัฐเซีค
179	สาธารณรัฐเชีควาอีโอน
180	สาธารณรัฐนาอูรู

181	สาธารณรัฐเบนิน
182	สาธารณรัฐมอลโดวา
183	สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
184	สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
185	สาธารณรัฐไอร์แลนด์
186	สิงคโปร์
187	หมู่เกาะเคย์แมน
188	หมู่เกาะโซโลมอน
189	อเมริกา
190	ออสเตรเลีย
191	ออสเตรเลีย
192	อังกฤษ
193	อันดอร์รา
194	อัฟกานิสถาน
195	อาเซอร์ไบจาน
196	อาร์เจนตินา
197	อาร์เมเนีย
198	อิตาลี
199	อินเดีย
200	อินโดนีเซีย
201	อิรัก
202	อิสราเอล
203	อิหร่าน
204	อียิปต์
205	อุซเบกิสถาน
206	อุรุกวัย
207	เอกวาดอร์
208	เอธิโอเปีย
209	เอริเทรีย
210	เอลซัลวาดอร์
211	เอสโตเนีย
212	เอสปาโโนลา

213	แองโกลา
214	แอฟริกา
215	แอฟริกาใต้
216	แอลจีเรีย
217	แอลเบเนีย
218	โอมาน
219	ไอซ์แลนด์
220	ไอบีเรีย
221	ฮ่องกง
222	ฮอนดูรัส
223	ฮังการี
224	เฮติ

4. เมื่อผู้ป่วยระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Continue: ระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
 - 4.1. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุข้อมูลเลขบัตรประชาชน: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน” ได้ Field เลขบัตรประชาชน
 - 4.2. กรณีผู้ป่วยไม่ได้ระบุเลขที่หนังสือเดินทาง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขที่หนังสือเดินทาง และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเลขที่หนังสือเดินทาง” ได้ Field เลขที่หนังสือเดินทาง
 - 4.3. กรณีผู้ป่วยระบุเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน และแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ได้ Field เลขบัตรประชาชน
 - 4.4. กรณีผู้ป่วยระบุรูปแบบของเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน และแสดงข้อความแจ้งเตือน “เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณาระบุใหม่อีกครั้ง” ได้ Field เลขบัตรประชาชน
 - 4.5. กรณีผู้ป่วยระบุข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง: ระบบเรียก API “SearchRegistration” เพื่อตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในฐานข้อมูลโรงพยาบาล
 - 4.5.1. กรณีไม่พบข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในฐานข้อมูลโรงพยาบาล: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง และแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูลของท่านในระบบ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง” ได้ Field เลขบัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง
 - 4.5.2. กรณีพบข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางในฐานข้อมูลโรงพยาบาล:

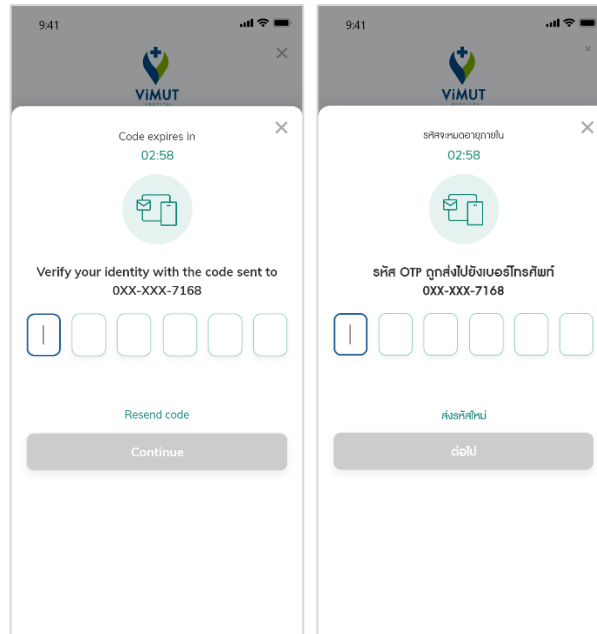


4.5.2.1. ระบบทำการส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผู้ป่วยที่อยู่ในฐานข้อมูลโรงพยาบาล เป็นข้อความ “กรุณกรอก xxxxxx ใน [ViMUT App.] ภายใน x นาที” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาไทย หรือ ส่งข้อความ “Please enter xxxxxx into [ViMUT App.] within the next x mins” กรณีผู้ป่วยเลือกภาษาในตอนเริ่มต้นเข้า Vimut Application เป็นภาษาอังกฤษ และระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ปวยระบุรหัส **OTP 6 หลัก** เพื่อยืนยันตัวตน โดยรหัส OTP จะมีอายุ **5 นาที**

4.5.2.1.1. ปุ่ม X: ผู้ป่วยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิดหน้าจอ โดยเมื่อกดแล้วระบบจะแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode) และรหัส OTP จะไม่สามารถใช้งานได้อีก

4.5.2.1.2. ปุ่ม Resend code: ผู้ป่วยกดปุ่ม “Resend code” กรณีต้องการให้ระบบส่ง OTP ใหม่ โดยระบบจะ Enable ปุ่ม Resend code เมื่อ OTP หมดอายุแล้วเท่านั้น โดยเมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม Resend code ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ระบบได้ทำการส่งรหัส OTP ใหม่ให้คุณเรียบร้อยแล้ว” เมื่อผู้ป่วยกดปิดข้อความแจ้งเตือน ระบบส่งรหัส OTP ให้กับผู้ป่วย และเริ่มนับถอยหลังเวลาหมดอายุของ OTP

4.5.2.1.3. ปุ่ม Continue: ระบบจะ Enable ปุ่มเมื่อผู้ป่วยระบุรหัส OTP ครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยหลังจากที่ผู้ป่วยระบุหมายเลข OTP ผู้ป่วยกดปุ่ม “Continue” เพื่อดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

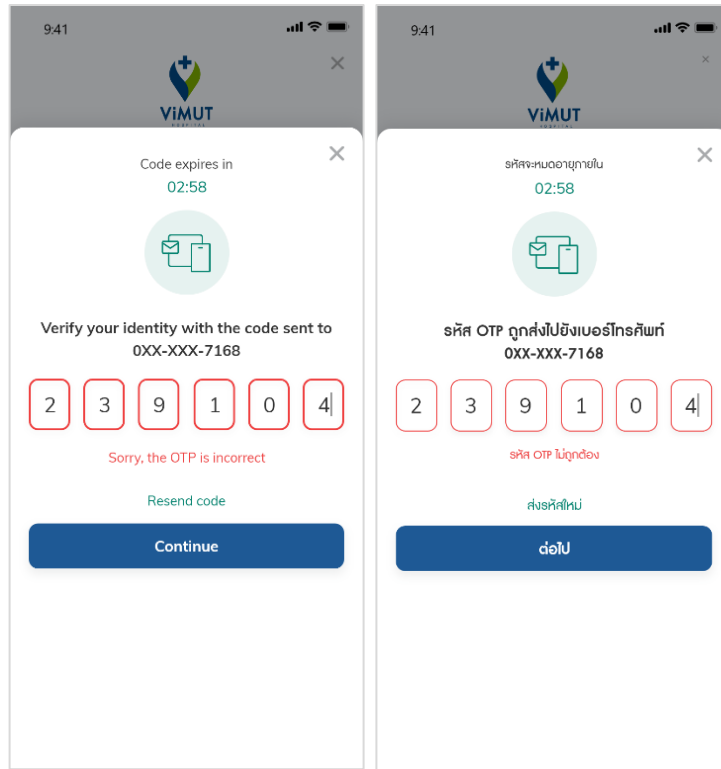

- กรณีผู้ป่วยระบุ OTP ไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field ระบุรหัส OTP และแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัส OTP ไม่ถูกต้อง” ได้ Field ระบุรหัส OTP
- กรณีผู้ป่วยระบุ OTP ที่หมดอายุ: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field ระบุรหัส OTP และแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัส OTP หมดอายุ” ได้ Field ระบุรหัส OTP
- กรณีผู้ป่วยระบุรหัส OTP ถูกต้อง: ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ป่วยระบุข้อมูลเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ ดังนี้

9:41





Create new password

Username

Vimutuser2021

New password

Enter new password 

Minimum 8 characters with a mix of letters, numbers and symbols

Confirm new password

Re-enter password

Create new password

9:41





ตั้งรหัสผ่านใหม่

ชื่อผู้ใช้งาน

Vimutuser2021

รหัสผ่านใหม่

กรุณาระบุรหัสผ่านใหม่ 

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
ชื่อผู้ใช้งาน	Username	ระบบ Default ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานตามที่ผู้ปวยกำหนดไว้ในตอนที่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน	ผู้ปวยไม่สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้งานได้
รหัสผ่านใหม่	New password	ผู้ปวยระบุข้อมูลรหัสผ่านใหม่	- เป็น Text Field และเป็น Require Field - จำกัดความยาว 30 ตัวอักษร - เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่านมีดังนี้: ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว - เมื่อผู้ปวยระบุข้อมูลรหัสผ่านหน้าจอแสดงแทนด้วยเครื่องหมาย • - เมื่อผู้ปวยกดที่สัญลักษณ์  ระบบแสดงรหัสผ่านที่ผู้ปวยระบุและเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่แสดงเป็น  และเมื่อกดอีกครั้ง

			ระบบจะแสดงรหัสผ่านเป็น • ดั้งเดิม 6. ผู้ป่วยสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เป็นรหัสเหมือนรหัสผ่านปัจจุบัน ได้
ยืนยันรหัสผ่าน ใหม่	Confirm new password	ผู้ป่วยระบุข้อมูลยืนยันรหัสผ่าน ใหม่	1. เป็น Text Field และเป็น Require Field 2. จำกัดความยาว 30 ตัวอักษร 3. เมื่อผู้ป่วยระบุข้อมูลยืนยัน รหัสผ่าน หน้าจอแสดงแทนด้วย เครื่องหมาย •
ปุ่ม ตั้งรหัสผ่าน ใหม่	ปุ่ม Create new password	ผู้ป่วยกดปุ่มเพื่อต้องการตั้ง รหัสผ่านใหม่	ปุ่มจะ Enable เมื่อผู้ป่วยระบุข้อมูลที่ เป็น Require Field ครบถ้วน
ปุ่ม X		ผู้ป่วยกดปุ่ม X เมื่อต้องการปิด หน้าจอ	เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม X ระบบแสดง หน้าจอ Login

- เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม Create new password ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยระบุ
ดังนี้

9:41



×



Create new password

×

Username

Vimutuser2021

New password

••••••••



Minimum 8 characters with a mix of letters, numbers and symbols

Confirm password

••••••••

Password does not match, please re-confirm

Create new password

9:41



×



ตั้งรหัสผ่านใหม่

×

ชื่อผู้ใช้งาน

Vimutuser2021

รหัสผ่านใหม่

••••••••



รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นใหญ่และตัวละอย่างน้อย 1 ตัว


ยืนยันรหัสผ่านใหม่

••••••••

ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณายืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง


ตั้งรหัสผ่านใหม่

- กรณีผู้ป่วยระบุ New password ไม่ตรงตามเงื่อนไข: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Password และแสดงข้อความแจ้งเตือน “รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว” ได้ Field New password
- กรณีผู้ป่วยระบุ Confirm new password ไม่ตรงกับข้อมูล New password: ระบบแสดงกรอบสีแดงที่ Field Confirm password และแสดงข้อความแจ้งเตือน “ยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณายืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง” ได้ Field Confirm new password
- กรณีผู้ป่วยระบุข้อมูลถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง” เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม Login ระบบแสดงหน้าจอ Login ให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่

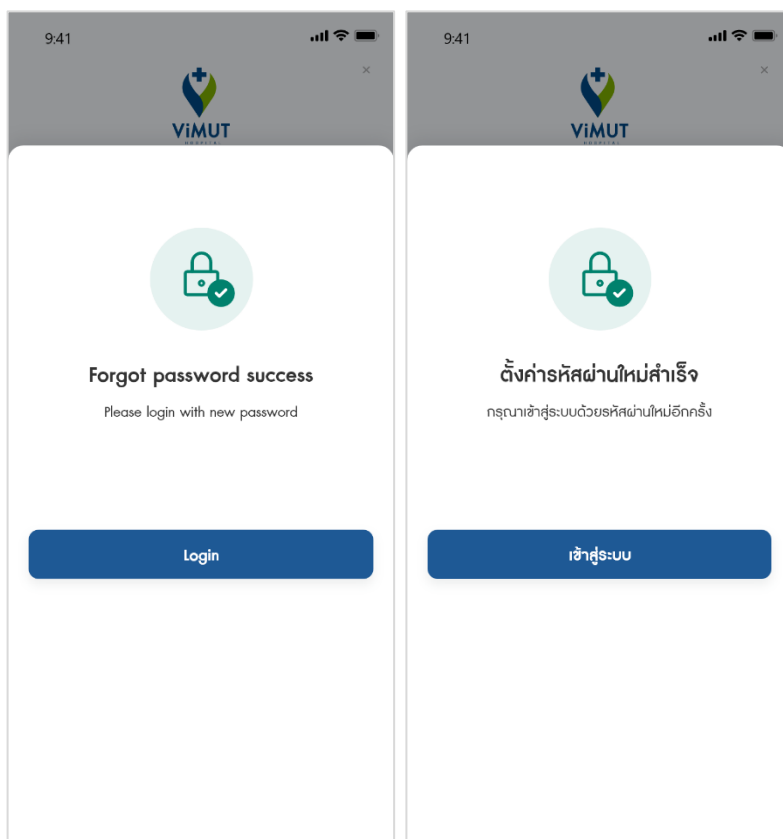

Patient Profile & Setting

1. ผู้ป่วยกดที่เมนู “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ที่หน้าจอ Main Page

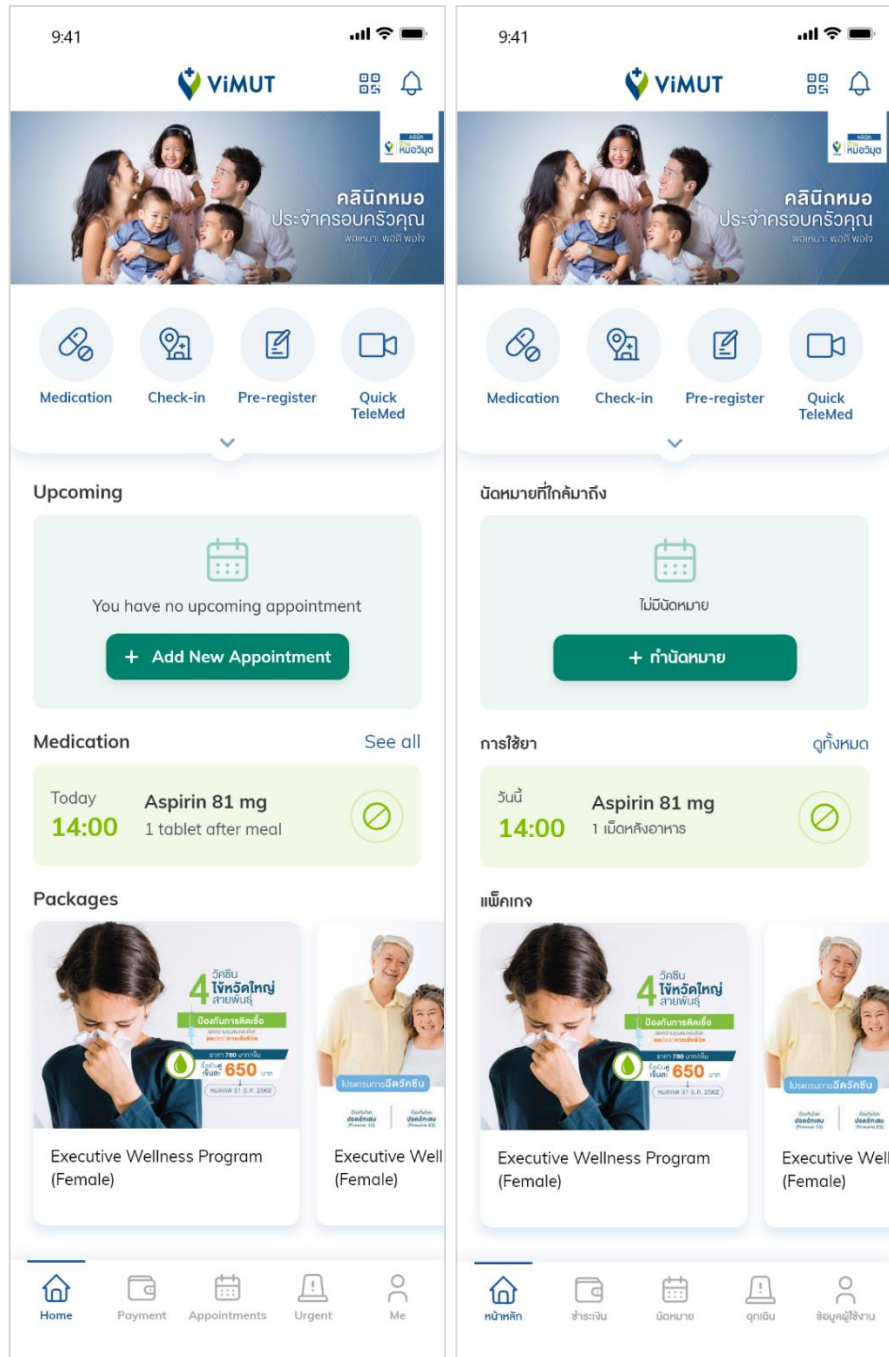

- 1.1. กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้ Login: ระบบแสดงหน้าจอ Login ให้ผู้ป่วย Login เข้าสู่ระบบ
- 1.2. กรณีผู้ป่วย Login แล้ว: ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย โดยแสดงข้อมูล ดังนี้

9:41

My profile



Mr. Nattapon Santichaiwong
32 years old

Hospital No.
1064052

Mobile No.
090-959-7168

Email
nattapon.s@gmail.com

Address
340/59 Rama IV Rd,
Khlong Toei, Khlong Toei,
Bangkok 10110

PERSONAL DETAILS

ID Card
1125402895709

Passport No.
-

Date of birth
27 September 1990

ALLERGIES

View

Penicillin, Anticonvulsants, Peanut

Logout

Home

Payment

Appointments

Urgent

Me

9:41

My profile



Mr. Nattapon Santichaiwong
32 years old

Hospital No.
1064052

Mobile No.
090-959-7168

Email
nattapon.s@gmail.com

Address
340/59 Rama IV Rd,
Khlong Toei, Khlong Toei,
Bangkok 10110

PERSONAL DETAILS

ID Card
1125402895709

Passport No.
-

Date of birth
27 September 1990

ALLERGIES

View

No allergies

Logout

Home

Payment

Appointments

Urgent

Me

9:41

ข้อมูลผู้ใช้งาน

Mr. Nattapon Santichaiwong

32 ปี

หมายเลขผู้ป่วย

1064052

เบอร์โทรศัพท์

090-959-7168

อีเมล

nattapon.s@gmail.com

ที่อยู่

340/59 Rama IV Rd,
Khlong Toei, Khlong Toei,
Bangkok 10110

ข้อมูลส่วนตัว

เลขบัตรประชาชน

1125402895709

เลขที่หนังสือเดินทาง

-

วัน/เดือน/ปีเกิด

27 กันยายน 1990

ข้อมูลการแพ้ยา

ดูรายละเอียด

Penicillin, Anticonvulsants, Peanut

ออกจากระบบ

หน้าหลัก

ชำระเงิน

นัดหมาย

ดูประวัติ

ข้อมูลผู้ใช้งาน

9:41

ข้อมูลผู้ใช้งาน

Mr. Nattapon Santichaiwong

32 ปี

หมายเลขผู้ป่วย

1064052

เบอร์โทรศัพท์

090-959-7168

อีเมล

nattapon.s@gmail.com

ที่อยู่

340/59 Rama IV Rd,
Khlong Toei, Khlong Toei,
Bangkok 10110

ข้อมูลส่วนตัว

เลขบัตรประชาชน

1125402895709

เลขที่หนังสือเดินทาง

-

วัน/เดือน/ปีเกิด

27 กันยายน 1990

ข้อมูลการแพ้ยา

ดูรายละเอียด

ไม่มีข้อมูลการแพ้ยา

ออกจากระบบ

หน้าหลัก

ชำระเงิน

นัดหมาย

ดูประวัติ

ข้อมูลผู้ใช้งาน

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
รูปภาพผู้ใช้งาน	Profile Picture	แสดงรูปภาพผู้ใช้งาน	แสดงรูปภาพผู้ใช้งานที่ผู้ป่วยได้ทำการ Upload รูปจากอัลบั้มในโทรศัพท์หรือ Upload จากการถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ
ปุ่ม 		ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพผู้ใช้งาน	1. เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม  ระบบแสดงตัวเลือกให้ผู้ป่วยเลือก ดังนี้ 1.1. กดลอง: กรณีผู้ป่วยเลือกกดลอง 1.1.1. กรณีผู้ป่วยยังไม่เคยอนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึง


			กล้องบนโทรศัพท์ ผู้ป่วย: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนขออนุญาตเข้าถึงกล้องบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย ● กรณีผู้ป่วยเลือก “อนุญาต”: ระบบเปิดกล้องโทรศัพท์ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยถ่ายรูปเพื่อแก้ไขรูปภาพผู้ใช้งาน ● กรณีผู้ป่วยเลือก “ไม่อนุญาต”: ระบบปิดข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ผู้ผู้ป่วยถ่ายรูปเพื่อแก้ไขรูปภาพผู้ใช้งาน 1.1.2. กรณีผู้ป่วยเคยอนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึงกล้องบนโทรศัพท์ผู้ป่วย: ระบบเปิดกล้องโทรศัพท์ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยถ่ายรูปเพื่อแก้ไขรูปภาพผู้ใช้งาน 1.2. อัลบั้ม 1.2.1. กรณีผู้ป่วยยังไม่เคยอนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึง
--	--	--	---

			อัลบั้มรูปบนโทรศัพท์ ผู้ป่วย: ระบบแสดง ข้อความแจ้งเตือนขอ อนุญาตเข้าถึงอัลบั้ม รูปบนโทรศัพท์ของ ผู้ป่วย ● กรณีผู้ป่วยเลือก “อนุญาต”: ระบบ เปิดอัลบั้มรูปบน โทรศัพท์ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย เลือกรูปในอัลบั้ม เพื่อแก้ไขรูปภาพ ผู้ใช้งาน ● กรณีผู้ป่วยเลือก “ไม่อนุญาต”: ระบบปิดข้อความ แจ้งเตือนและไม่ อนุญาตให้ผู้ป่วย เลือกรูปในอัลบั้ม เพื่อแก้ไขรูปภาพ ผู้ใช้งาน 1.2.2. กรณีผู้ป่วยเคย อนุญาตให้ Vimut Application เข้าถึง อัลบั้มรูปบนโทรศัพท์ ผู้ป่วย: ระบบเปิด อัลบั้มรูปบนโทรศัพท์ ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย เลือกรูปในอัลบั้มเพื่อ แก้ไขรูปภาพผู้ใช้งาน 2. เมื่อผู้ป่วยเปลี่ยนรูปภาพผู้ใช้งาน เสร็จสิ้น: ระบบแสดงข้อความแจ้ง
--	--	--	---

			เตือน “เปลี่ยนรูปภาพผู้ใช้งาน สำเร็จ”
ชื่อ-นามสกุล	Name	แสดงชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients”
อายุ	Age	แสดงอายุผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients”
หมายเลขผู้ป่วย	Hospital No.	แสดงหมายเลขผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients”
เบอร์โทรศัพท์	Mobile No.	แสดงเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients”
อีเมล	Email	แสดงอีเมลผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients”
ที่อยู่	Address	แสดงที่อยู่ผู้ป่วย	1. แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients” 2. ระบบแสดงข้อมูลเรียงตามนี้ 2.1. บ้านเลขที่ 2.2. หมู่ 2.3. ซอย 2.4. ถนน 2.5. อำเภอ 2.6. ตำบล 2.7. จังหวัด 2.8. รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลส่วนตัว	PERSONAL DETAILS		
เลขบัตร ประชาชน	ID Card	แสดงเลขบัตรประชาชนผู้ป่วย	1. แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients” 2. กรณีไม่มีข้อมูล แสดงแทนด้วย เครื่องหมาย -
เลขที่หนังสือ เดินทาง	Passport No.	แสดงเลขที่หนังสือเดินทางผู้ป่วย	1. แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients” 2. กรณีไม่มีข้อมูล แสดงแทนด้วย เครื่องหมาย -

วัน/เดือน/ปีเกิด	Date of birth	แสดงวัน/เดือน/ปีเกิด ผู้ป่วย	1. แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Patients” 2. แสดงปีเกิดเป็น ค.ศ. 3. Format: day month year ตัวอย่าง 14 February 2021
ข้อมูลการแพ้ยา	ALLERGIES		1. แสดงข้อมูลชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้ ตามที่ได้รับจาก API “Allergy” 2. กรณีไม่มีข้อมูล ระบบแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลการแพ้ยา”
ปุ่ม ดูรายละเอียด	ปุ่ม View	ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อต้องการดูข้อมูลการแพ้ยา	เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม View ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลการแพ้ยา (อ้างอิงตาม Flow หัวข้อ 2: Patient Profile & Setting)
ปุ่ม 		ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อต้องการดู QR Code ของตน	1. กรณีที่ผู้ป่วยไม่มี HN หรือ Temp HN ให้ทำการซ่อนปุ่ม  2. เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอ QR Code (อ้างอิงตาม Flow 1.3: Patient Profile & Setting)
ปุ่ม ออกจากระบบ	ปุ่ม Logout	ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อต้องการออกจากระบบ	เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม Logout ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ยืนยันการออกจากระบบ” 1. กรณีผู้ป่วยเลือก “ยืนยัน”: ระบบแสดงหน้าจอ Main Page (Guest Mode) 2. กรณีผู้ป่วยเลือก “ยกเลิก”: ระบบปิดข้อความแจ้งเตือน

1.3. ผู้ป่วยกดปุ่ม  ที่หน้าจอ ข้อมูลผู้ใช้งาน: ระบบแสดง QR Code ของผู้ป่วย ดังนี้

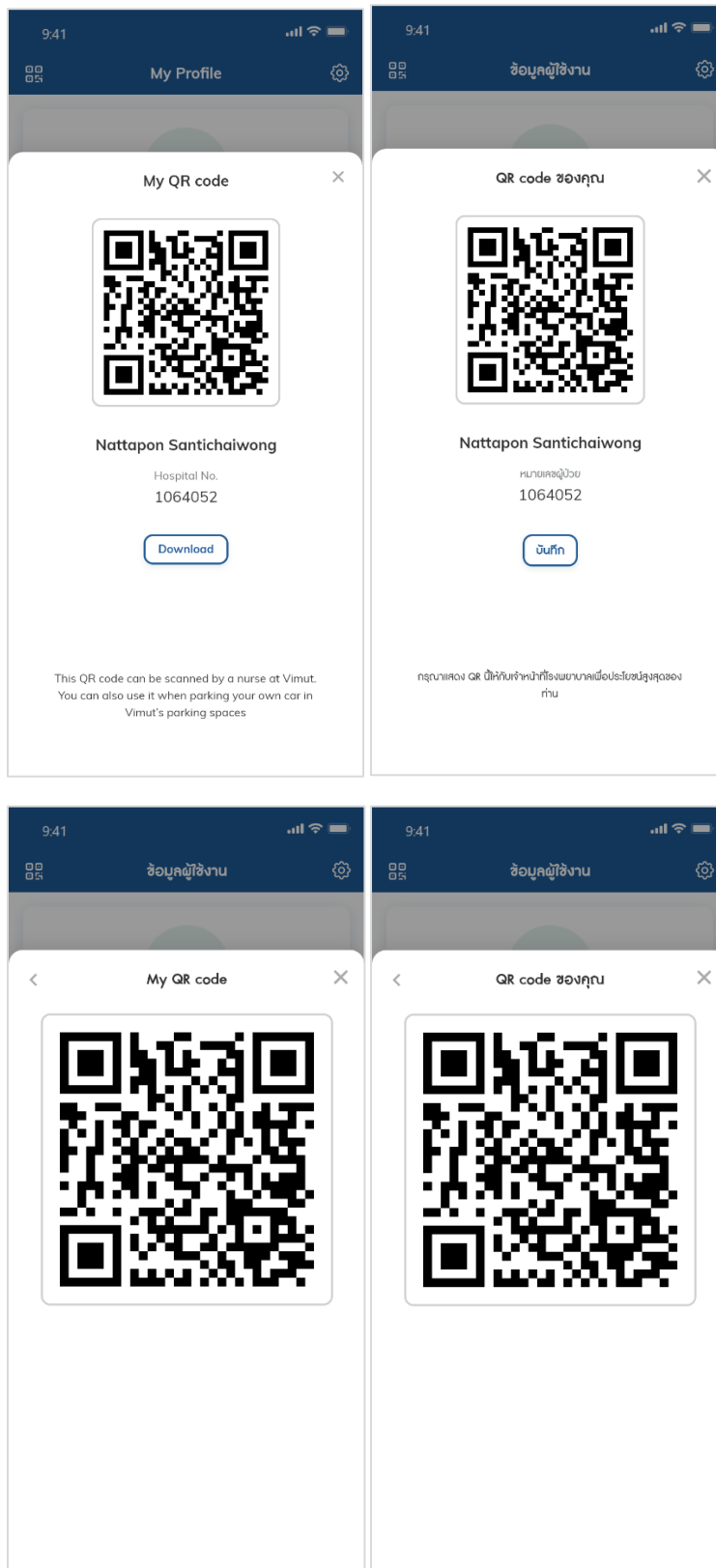

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
QR Code	QR Code	แสดง QR Code ของผู้ป่วย	1. กรณีที่มี HN: ระบบสร้าง QR Code จาก HN 2. กรณีไม่มี HN: ระบบสร้าง QR Code จาก Temp HN 3. เมื่อกดที่ QR ระบบจะทำการขยาย QR ให้ใหญ่ขึ้น และสามารถกดย่อ QR ได้โดยกดปุ่ม <
ชื่อ-นามสกุล	Name	แสดงชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API "Patients"
หมายเลขผู้ป่วย	Hospital No.	แสดงหมายเลขผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API "Patients"
ปุ่ม บันทึก	ปุ่ม Download	ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อต้องการบันทึก QR Code	เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม Download: ระบบตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 1. กรณีผู้ป่วยยังไม่เคยอนุญาตให้เข้าถึงอัลบั้ม: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนขออนุญาตเข้าถึงอัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของผู้ป่วย (รอคอนเฟิร์มข้อความ) 2. กรณีผู้ป่วยเคยอนุญาตให้เข้าถึงอัลบั้ม: ระบบบันทึกรูป QR Code ลงบนโทรศัพท์ของผู้ป่วย 3. เมื่อบันทึกรูปภาพแล้ว ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "บันทึกรูปภาพสำเร็จ"
กรุณาแสดง QR นี้ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน	This QR code can be scanned by a nurse at Vimut. You can also use it when parking your own car in Vimut's parking spaces	ข้อความหมายเหตุการใช้งาน QR Code	รอคอนเฟิร์มข้อความ

ปุ่ม X		ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อต้องการปิดหน้าจอ	เมื่อผู้ป่วยกดปุ่ม X ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลผู้ใช้งาน
--------	--	------------------------------------	--

2. ผู้ป่วยกดที่ปุ่ม “View” ที่หน้าจอ ข้อมูลผู้ใช้งาน หัวข้อ Allergies: ระบบแสดงข้อมูลรายการแพ้ยาของผู้ป่วย โดยแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- กรณีเป็นข้อมูลการแพ้ยาที่ได้รับจาก API “Allergy”: ระบบเรียงรายการยาตามลำดับข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลส่งมาใน API
 - กรณีเป็นข้อมูลการแพ้ยาที่ผู้ป่วยเพิ่มเอง: ระบบเรียงรายการข้อมูลตามที่ผู้ป่วยเพิ่มตามตัวอักษรของชื่อยา โดยเรียงจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ก่อน จากนั้นตามด้วยตัวอักษร ก-ฮ และเรียงต่อจากรายการข้อมูลแพ้ยาที่ได้รับทาง API “Allergy” (ใน Sprint 1 จะยังไม่แสดงข้อมูลส่วนนี้)
- โดยแต่ละรายการแสดงข้อมูล ดังนี้

9:41 Allergies ● Penicillin Symptoms Hives, swelling, wheezing Severity High Documented on 14-06-2021 ● Anticonvulsants Symptoms Skin rash, fever Severity Moderate Documented on 14-06-2021 ● Xylocaine Symptoms Itching, nausea, diarrhea Severity Low Documented on 14-06-2021 ● Tylenol Symptoms Itching, nausea, diarrhea Severity Unable to determined Documented on 14-06-2021	9:41 ข้อมูลการแพ้ยา ● Penicillin อาการแพ้ Hives, swelling, wheezing ระดับการแพ้ High บันทึกการแพ้ยา 14-06-2021 ● Anticonvulsants อาการแพ้ Skin rash, fever ระดับการแพ้ Moderate บันทึกการแพ้ยา 14-06-2021 ● Xylocaine อาการแพ้ Itching, nausea, diarrhea ระดับการแพ้ Low บันทึกการแพ้ยา 14-06-2021 ● Tylenol อาการแพ้ Itching, nausea, diarrhea ระดับการแพ้ Unable to determined บันทึกการแพ้ยา 14-06-2021
--	---

ชื่อฟิลด์ (TH)	ชื่อฟิลด์ (EN)	คำอธิบาย	Remark
สัญลักษณ์สำหรับบอกระดับการแพ้		แสดงสัญลักษณ์ตามระดับการแพ้	สีของสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปตามระดับการแพ้ ● หมายถึง ระดับการแพ้รุนแรง

			● หมายถึง ระดับการแพ้เป็นระดับน้อย ● หมายถึง ระดับการแพ้เป็นระดับปานกลาง ● หมายถึง ไม่สามารถประเมินระดับการแพ้ได้
ชื่อยา	Allergy or hypersensitivity	แสดงชื่อยาที่ผู้ป่วยแพ้	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Allergy”
อาการแพ้	Symptoms	แสดงอาการแพ้ยาของผู้ป่วย	แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Allergy”
ระดับการแพ้	Severity	แสดงระดับการแพ้ยาของผู้ป่วย	1. แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Allergy” 2. ระดับการแพ้แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 2.1. High / รุนแรง 2.2. Low / น้อย 2.3. Medium / ปานกลาง 2.4. Unable to determined / ไม่สามารถวัดระดับความรุนแรงได้
วันที่บันทึกข้อมูล	Documented on	แสดงวันที่บันทึกข้อมูลการแพ้ยา	1. แสดงข้อมูลที่ได้รับจาก API “Allergy” 2. จะแสดงในกรณีที่ข้อมูลที่ส่งมาจาก API “Allergy” เท่านั้น 3. Format วันที่เป็น: dd-mm-yyyy 4. แสดงปีที่บันทึกข้อมูลเป็นปี ค.ศ.

2.1. กรณีผู้ป่วยไม่มีข้อมูลการแพ้ยา ระบบแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลการแพ้ยา”

